

# Chemie- Membranpumpe MV 10C NT

[Link zur Webseite](#)

## Produktbeschreibung

Vierstufige Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Fördern korrosiver Gase und Dämpfe und erfüllen höchste Ansprüche an das Endvakuum. Der vierstufige Aufbau dieser achtzylindrigen Pumpen ermöglicht die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem besonders guten Endvakuum bis 0.9 mbar in einem sehr kompakten Aufbau. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Erweitert mit einem druckseitigen Emissionskondensator (EK) ist die MV 10C NT +EK ein ausgezeichnet umweltverträgliches System mit effizienter Lösemittelrückgewinnung. Ein optional erhältlicher Ansaugabscheider (AK) schützt die Pumpen vor Partikeln und Flüssigkeitströpfchen.

## Leistungsmerkmale

- hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- verkürzte Prozesszeiten durch sehr hohes Saugvermögen, auch nahe am Endvakuum
- sehr vibrationsarm und leise
- besonders gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung (Zubehör je nach Ausführung)

Bestelldaten

| Produktbezeichnung | Netzspannung   Netzfrequenz | Stecker | Artikelnr. |
|--------------------|-----------------------------|---------|------------|
| MV 10C NT          | 200-230 V   50-60 Hz        | CEE     | 20744300   |

Lieferumfang

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.


Zubehör

- Ansaugabscheider AK mit Glas-Rundkolben 500 ml mit Anschlüssen KF DN 25 und Schlauchwelle DN 15 mm AK 500 / KF DN 25 (20699979)
- Schalldämpfer mit Schlauch 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Spannring für Kleinflansch KF DN 20/25 (20660001)
- Universal-Zentrierring für Kleinflansch KF DN 20/25 (20660196)
- Vakuumschlauch PVC mit Stützspirale, mit Kleinflanschen KF DN 25 (20686021)
- Kleinflansch mit Schlauchwelle KF DN 25 / DN 10 mm (20662807)
- Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (20686002)
- Dichtungssatz MD 12C NT / MV 10C NT (20696839)


## Technische Daten

| Max. Saugvermögen (mbar)                                                                                           | 9.5 m <sup>3</sup> /h                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Max. Saugvermögen (cfm)                                                                                            | 5.6 cfm                                      |
| Endvakuum                                                                                                          | 0.9 mbar / 0.68 torr                         |
| Endvakuum mit Gasballast                                                                                           | 1.5 mbar / 1.1 torr                          |
| Anzahl der Zylinder                                                                                                | 8                                            |
| Anzahl Stufen                                                                                                      | 4                                            |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                                            | 10 - 40 °C                                   |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                                           | -10 - 60 °C                                  |
| Max. Auslassdruck absolut                                                                                          | 1.1 bar                                      |
| Anschluss saugseitig                                                                                               | Kleinflansch KF DN 25                        |
| Anschluss druckseitig                                                                                              | Schlauchwelle DN 15 mm                       |
| Nennleistung                                                                                                       | 0.53 kW                                      |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz                                                                                              | 1650 min <sup>-1</sup>                       |
| IP-Schutzart nach IEC 60529                                                                                        | IP 40                                        |
| Abmessungen (L x B x H)                                                                                            | 533 mm x 260 mm x 359 mm                     |
| Gewicht                                                                                                            | 28.1 kg                                      |
| Geräusch (Schalldruckpegel) in dBA bei 50 Hz bzw. 1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 50 dBA                                       |
| ATEX-Konformität                                                                                                   | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only |
| NRTL Zertifizierung                                                                                                | Nein                                         |



## Saugvermögenskurve

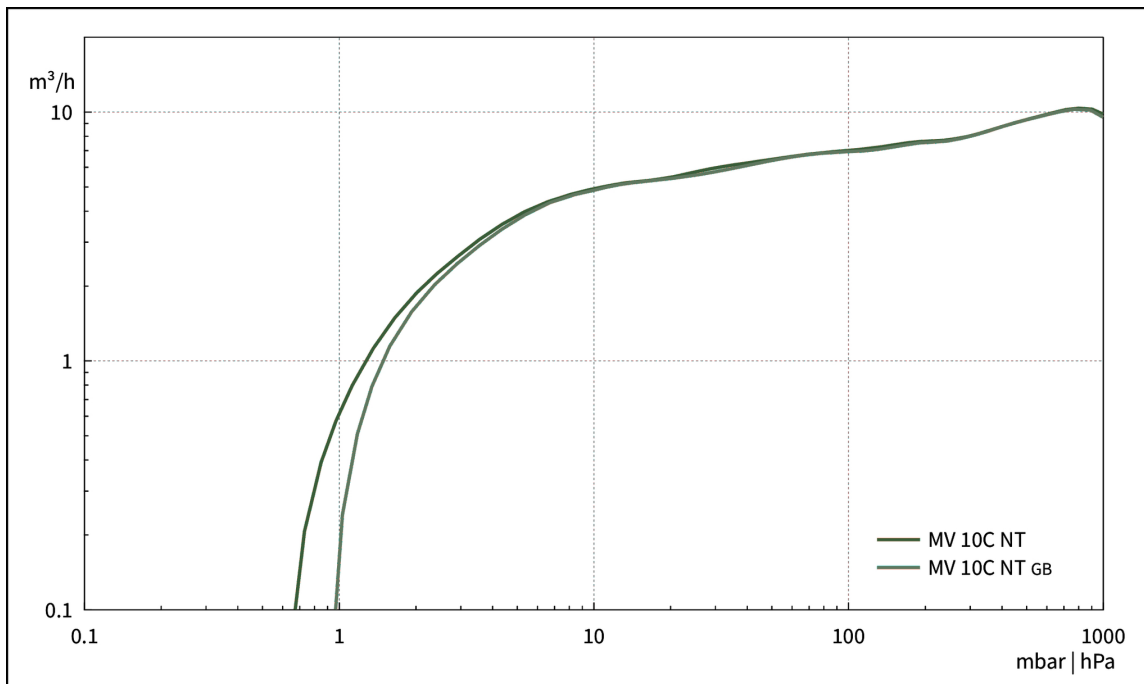

## Abpumpkurve (100 l Behälter)

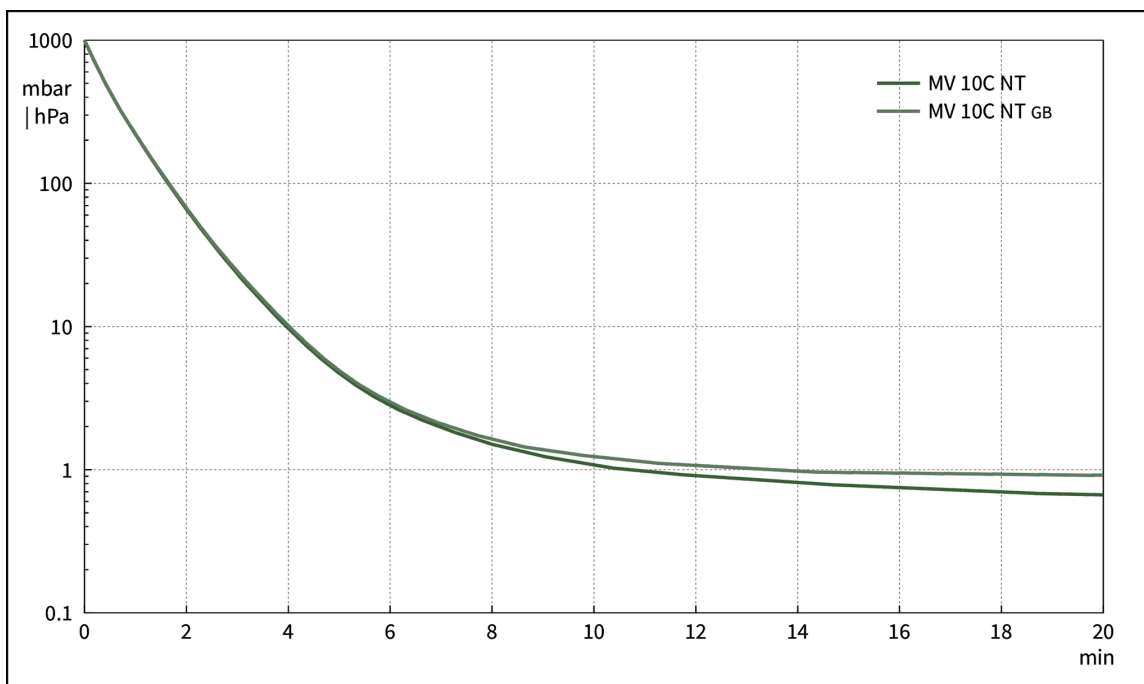

## Produktbild und Maßblatt

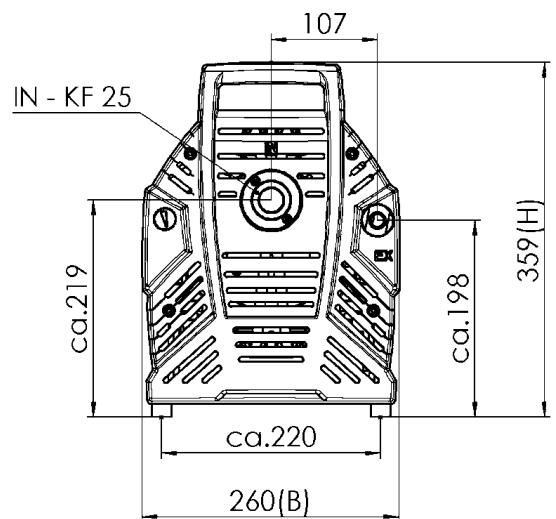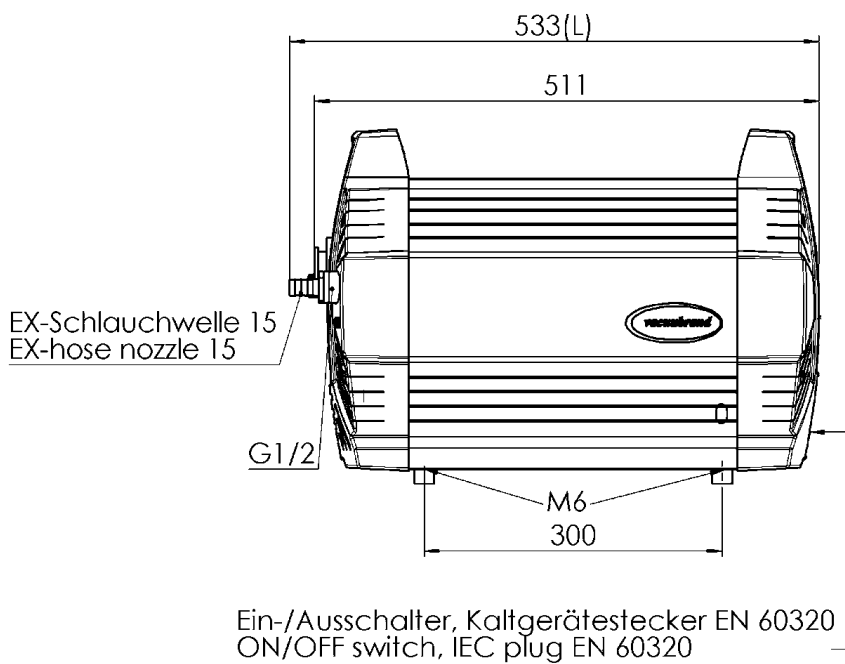

Alle Maße / all dimensions (mm)

VACUUBRAND ME 16C NT, MD 12C NT, MV 10C NT  
Version 2012/04/20

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Postfach 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumherzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

#### **Alles mit einem Ziel:**

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com