

# Chemie-Pumpstand PC 520 select

[Link zur Webseite](#)



## Produktbeschreibung

Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewährte Lösung für den unabhängigen, parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Als Basispumpe dient die MZ 2C NT, sie erfüllt die mittleren Laborvakuumanforderungen für die meisten Lösemittel. Jeder Vakuumanschluss verfügt über ein Ventil zur elektronischen Vakuumregelung. Beide Vakuumanschlüsse sind durch Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung gesichert. Der integrierte Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche bietet vordefinierte Vakuumprozesse für alle gängigen Laboranwendungen und steuert die beiden Magnetventile. Selbstverständlich lassen sich Applikation, gewünschtes Vakuum und weitere Parameter auch individuell zusammenstellen und für die beiden angeschlossenen Prozesse unabhängig voneinander regeln. Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Tröpfchen zurück. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln für aktiven Schutz der Umwelt.

## Leistungsmerkmale

- Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor
- vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse
- einfach zu bedienender Anwendungseditor ermöglicht eigene Prozessabläufe
- leistungsfähige Vakuumpumpe mit hervorragender Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- PC 520 select für den parallelen Betrieb zweier Anwendungen mit elektronischer Regelung

Bestelldaten

| Produktbezeichnung | Netzspannung   Netzfrequenz | Stecker | Artikelnr. |
|--------------------|-----------------------------|---------|------------|
| PC 520 select      | 230 V   50-60 Hz            | CN      | 20733356   |

Lieferumfang

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.


Zubehör

- Funktionserweiterung für VACUU·SELECT Controller VACUU·SELECT User Management (20700900)
- Schalldämpfer mit Schlauch 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Vakuumschlauch transparent DN 8 mm (20686061)
- Füllstandssensor komplett für Rundkolben 500 ml (20699908)
- Kühlwasserventil VKW-B (20674220)
- Dichtungssatz MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Dichtungssatz MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)


## Technische Daten

| Max. Saugvermögen 50 Hz (mbar)                                                                                     | 2 m³/h                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Saugvermögen 60 Hz (cfm)                                                                                      | 1.4 cfm                                                                                                                  |
| Endvakuum                                                                                                          | 7 mbar / 5 torr                                                                                                          |
| Endvakuum mit Gasballast                                                                                           | 12 mbar / 9 torr                                                                                                         |
| Anzahl der Zylinder                                                                                                | 2                                                                                                                        |
| Anzahl Stufen                                                                                                      | 2                                                                                                                        |
| Vakuumanzeige / -controllertyp                                                                                     | VACUU-SELECT                                                                                                             |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                                            | 10 - 40 °C                                                                                                               |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                                           | -10 - 60 °C                                                                                                              |
| Max. Auslassdruck absolut                                                                                          | 1.1 bar                                                                                                                  |
| Anschluss saugseitig                                                                                               | 2 x Schlauchwelle DN 8-10 mm                                                                                             |
| Anschluss druckseitig                                                                                              | Schlauchwelle DN 8-10 mm                                                                                                 |
| Anschluss Kühlwasser                                                                                               | 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm                                                                                              |
| Nennleistung                                                                                                       | 0.18 kW                                                                                                                  |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                                                                                              |
| IP-Schutzart nach IEC 60529                                                                                        | IP 20                                                                                                                    |
| Abmessungen (L x B x H)                                                                                            | 435 mm x 272 mm x 457 mm                                                                                                 |
| Gewicht                                                                                                            | 19.6 kg                                                                                                                  |
| Geräusch (Schalldruckpegel) in dBA bei 50 Hz bzw. 1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 45 dBA                                                                                                                   |
| ATEX-Konformität                                                                                                   | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only                                                                             |
| NRTL Zertifizierung                                                                                                | Nein                                                                                                                     |
| Schnittstelle                                                                                                      | Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Typ A): Datenübertragung, Software-Update, RS-232 (zusätzlicher Adapter erforderlich) |


## Saugvermögenskurve bei 50 Hz

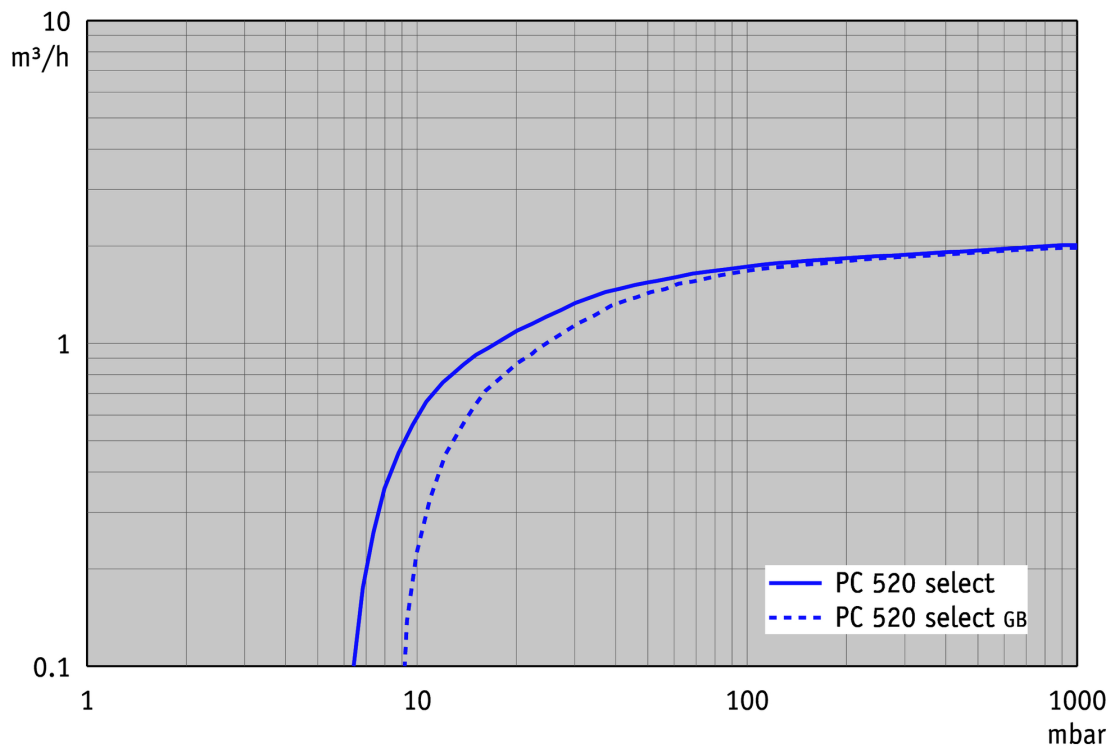


## Abpumpkurve bei 50 Hz (10 l Behälter)

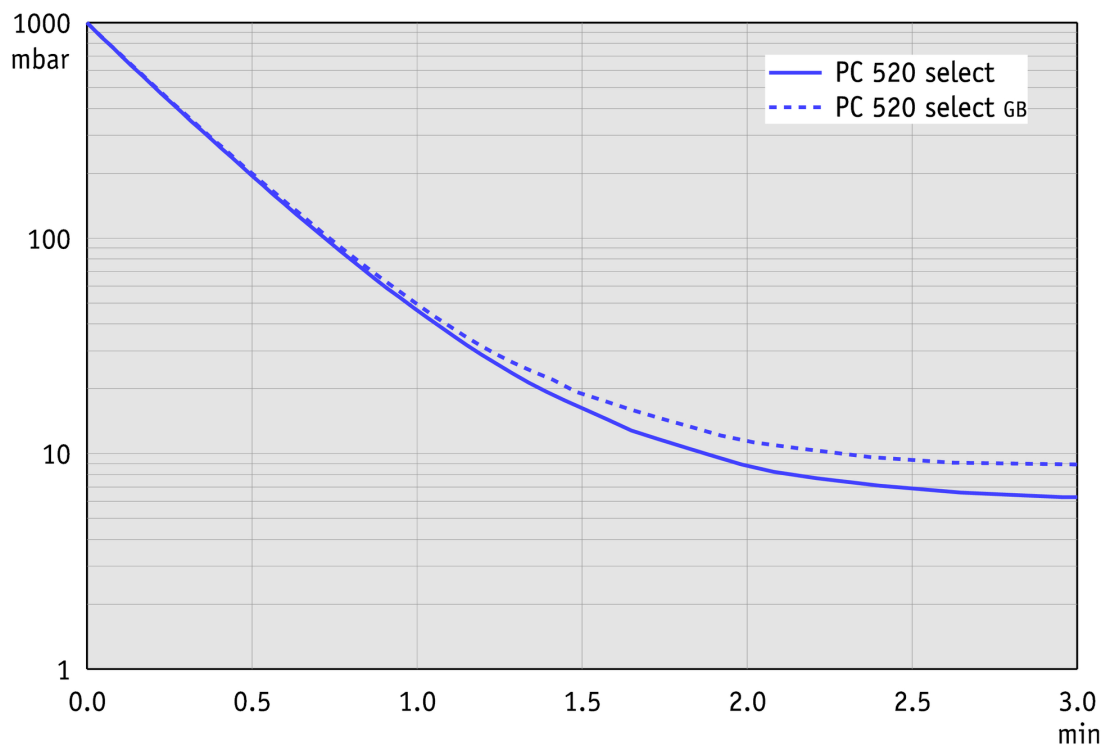


## Saugvermögenskurve bei 60 Hz

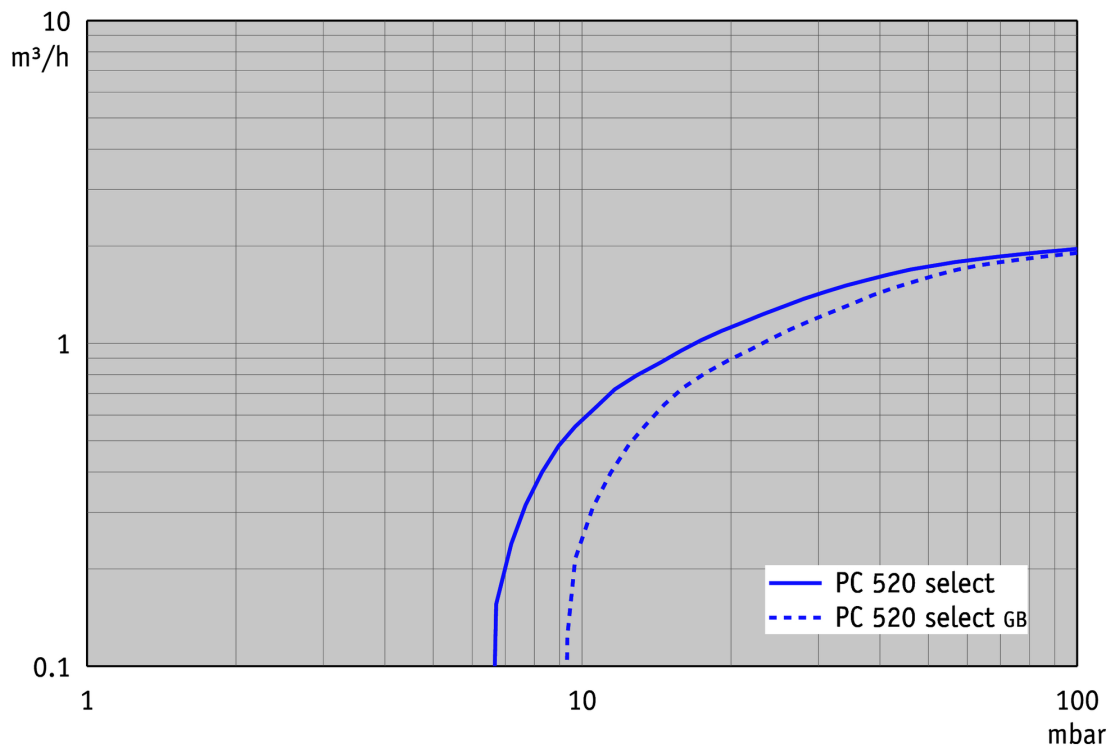

## Abpumpkurve bei 60 Hz (10 l Behälter)

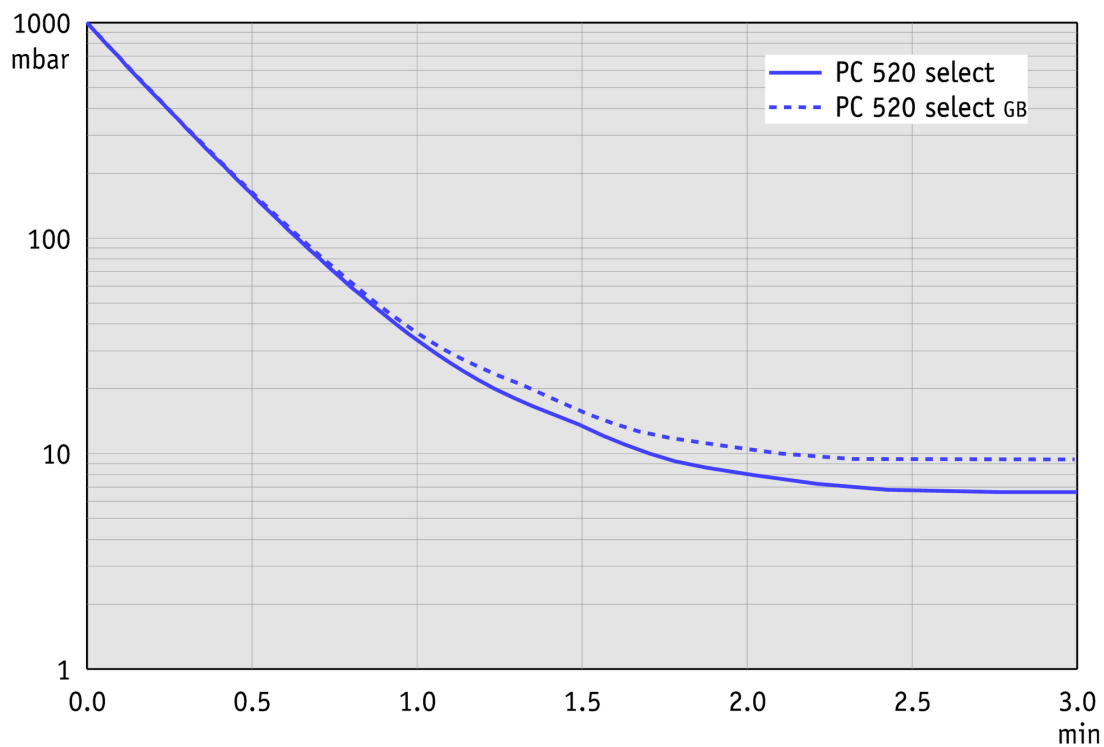

Produktbild und Maßblatt

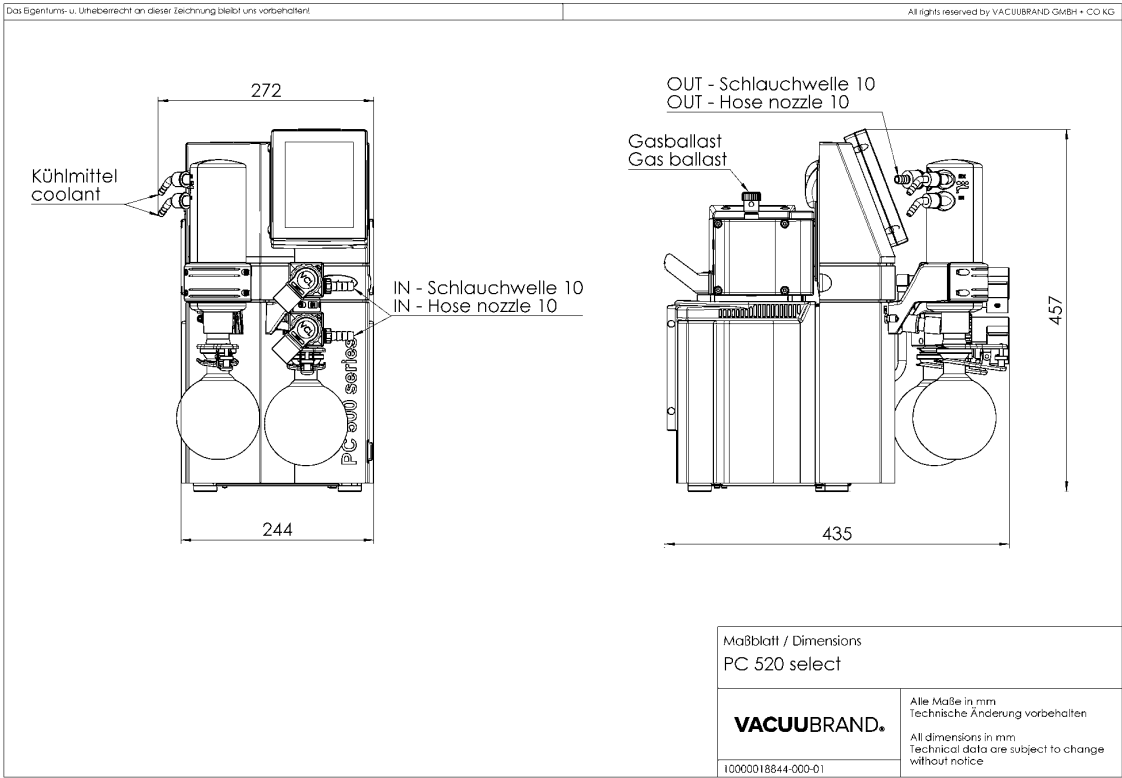

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Postfach 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumherzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

#### **Alles mit einem Ziel:**

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com