


# Pompe à palettes RE 6

Lien vers le site web

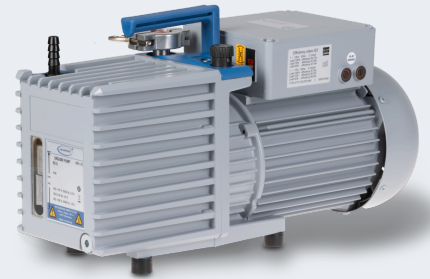

## Description du produit

Ces puissantes pompes à palettes sont excellentes en terme de compacité et de légèreté. Elles sont idéales pour les utilisations en laboratoire et en production, pour lesquelles sont requis un bon vide limite avec une charge de gaz moyenne.

## Caractéristiques

- débit élevé, même à proximité du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique

## Référence de commande

| Désignation | Tension   fréquence nominales                                 | Type de fiche secteur | Référence |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| RE 6        | 220-230 V   50-60 Hz<br>100-115 V   50-60 Hz<br>120 V   60 Hz | US                    | 20797166  |

## Livraison

Pompe livrée complète, prête à l'emploi, avec charge d'huile et manuel d'utilisation


## Accessoires

- Séparateur de brouillard FO R 2/2.5/5/6 (20698003)
- Vanne de vide VS 16 (20665004)
- Collier de serrage pour petite bride KF DN 10/16 (20660000)
- Anneau de centrage universel pour petite bride KF DN 10/16 (20660195)
- Petite bride à embout KF DN 16 / DN 10 mm (20662806)
- Tuyau inox flexible à petites brides KF DN 16 (20673336)
- Tuyau à vide caoutchouc DN 10 mm (20686002)
- Kit d'entretien RE 2.5 - RZ 6 (20648977)


## Caractéristiques techniques

| Débit maximale 50 Hz (mbar)                                                                                                        | 5.7 m <sup>3</sup> /h                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Débit maximale 60 Hz (cfm)                                                                                                         | 4.0 cfm                                                  |
| Vide limite                                                                                                                        | 1 x 10 <sup>-1</sup> mbar / 0.75 x 10 <sup>-1</sup> torr |
| Vide limite avec lest d'air                                                                                                        | 6 x 10 <sup>-1</sup> mbar / 4.5 x 10 <sup>-1</sup> torr  |
| Pression partielle finale sans lest d'air                                                                                          | 1 x 10 <sup>-1</sup> mbar / 0.75 x 10 <sup>-1</sup> torr |
| Compatibilité à la vapeur d'eau                                                                                                    | 40 mbar / 30 torr                                        |
| Nombre de d'étages                                                                                                                 | 1                                                        |
| Température ambiante maxi admissible (service)                                                                                     | 12 - 40 °C                                               |
| Température ambiante maxi admissible (stockage)                                                                                    | -10 - 60 °C                                              |
| Pression max. à l'échappement (abs.)                                                                                               | 1.1 bar                                                  |
| Vol. d'huile min./max.                                                                                                             | 0.36 / 0.93 l                                            |
| Raccord côté aspiration                                                                                                            | Petite bride KF DN 16 / embout DN 10 mm                  |
| Raccord côté pression                                                                                                              | Embout DN 8-10 mm                                        |
| Puissance nominale du moteur                                                                                                       | 0.18 kW                                                  |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                              |
| Classe de protection IP selon IEC 60529                                                                                            | IP 40                                                    |
| Dimensions (L x P x H)                                                                                                             | 420 mm x 156 mm x 240 mm                                 |
| Poids                                                                                                                              | 15.8 kg                                                  |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/<br>62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 50 dBA                                                   |
| Certification NRTL                                                                                                                 | Oui                                                      |


## Courbe débit à 50 Hz

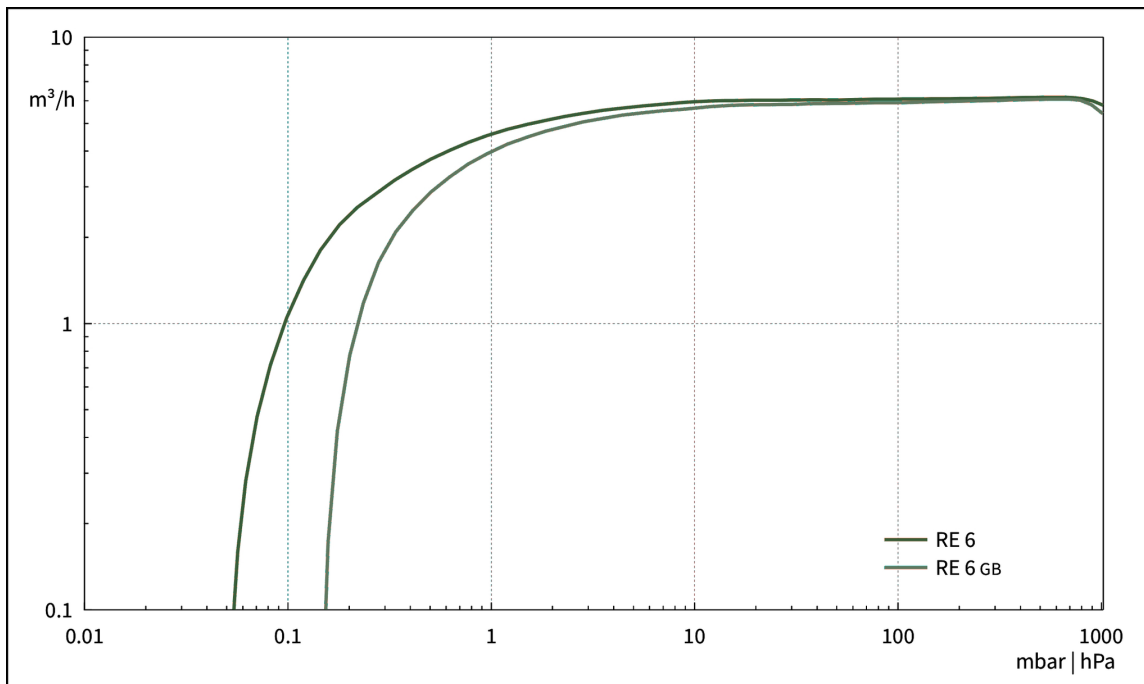


## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

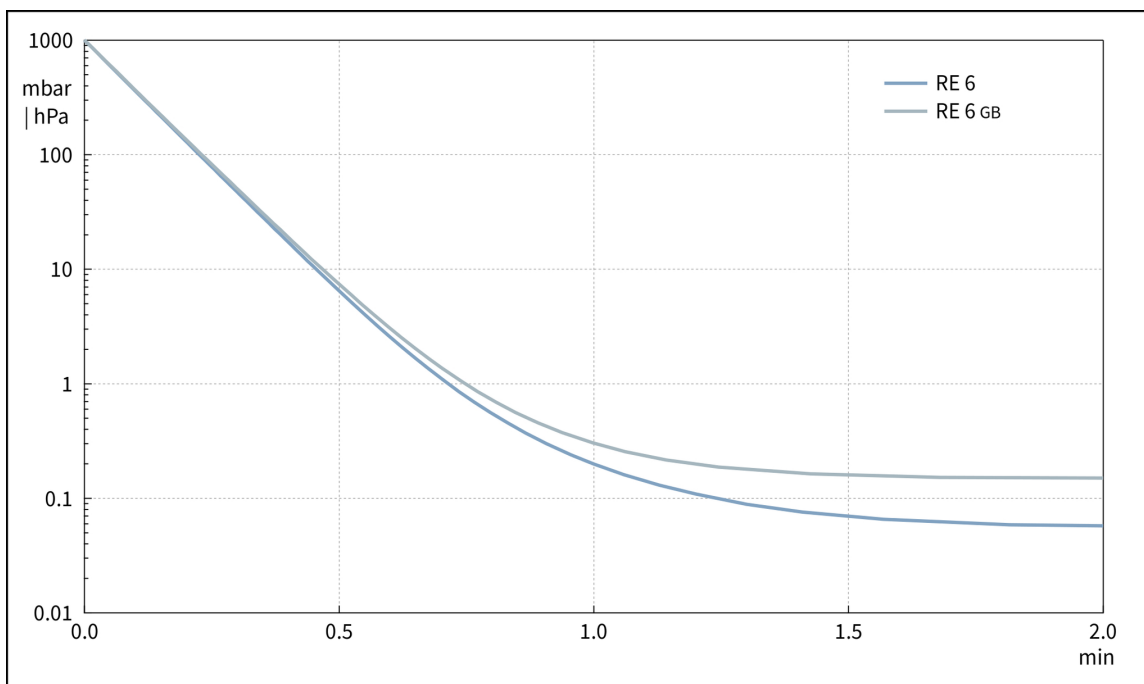



## Courbe de débit à 60 Hz

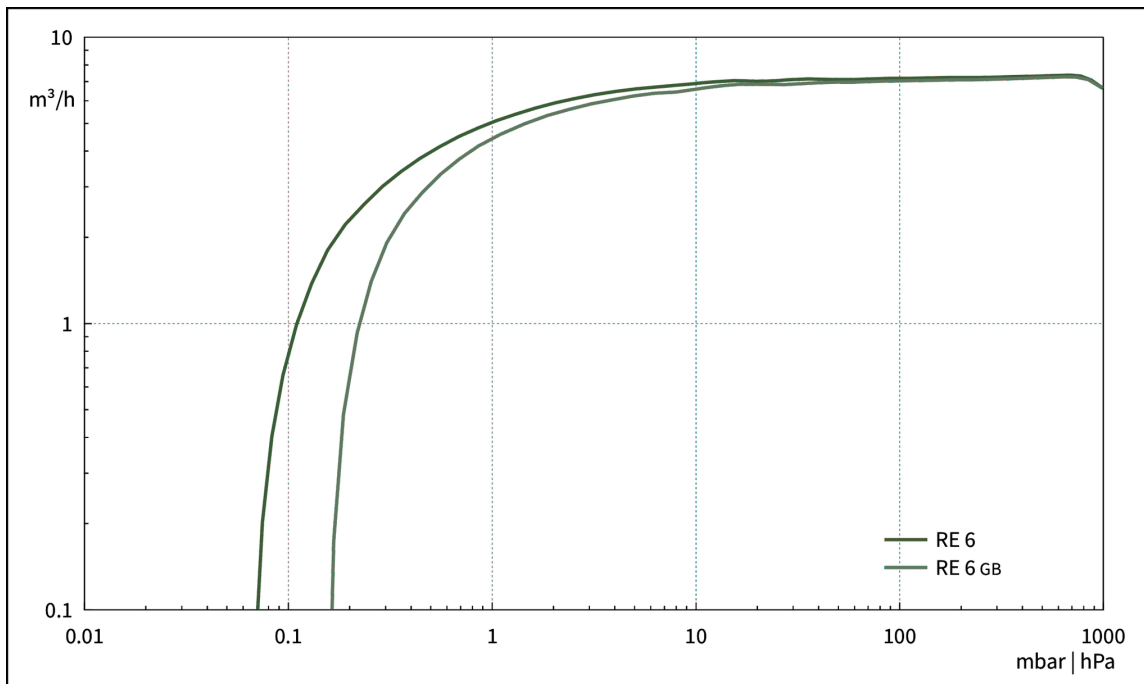

## Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

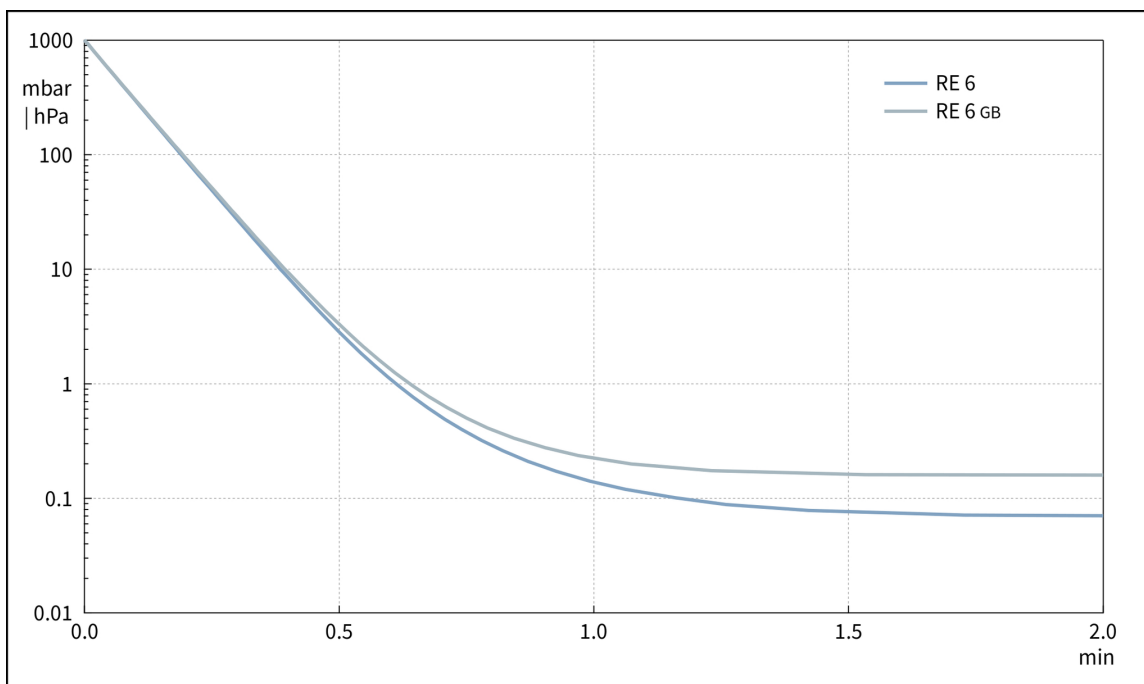

Plan de masse

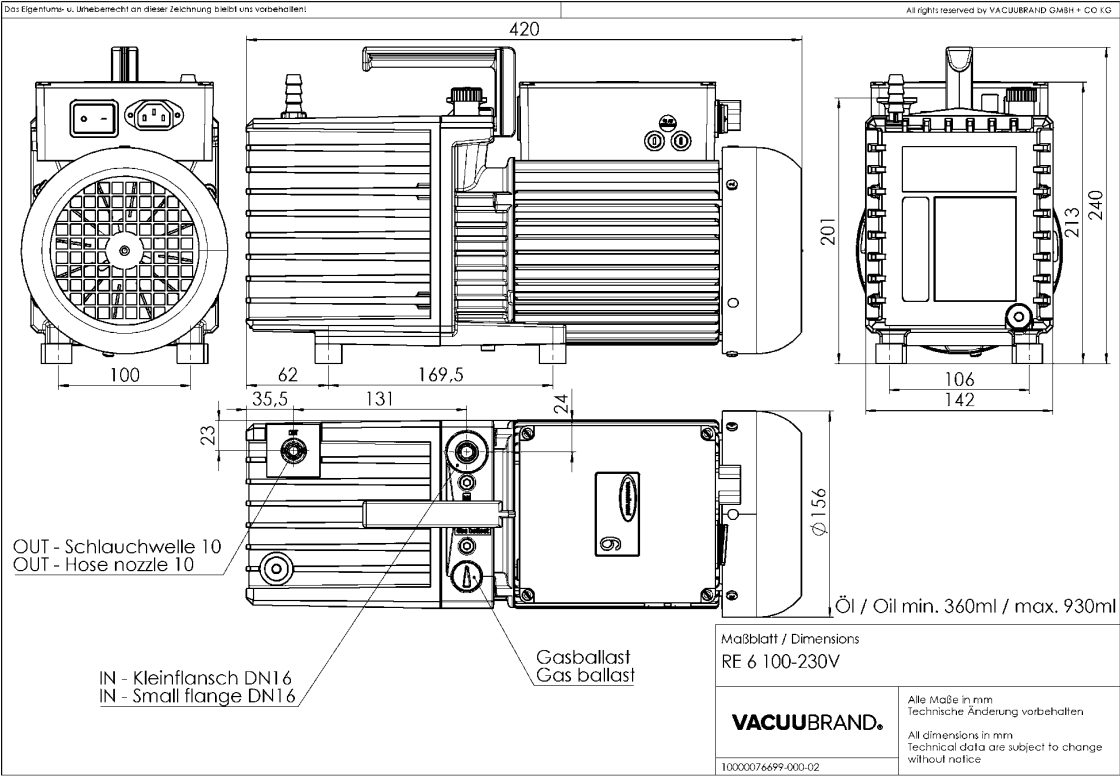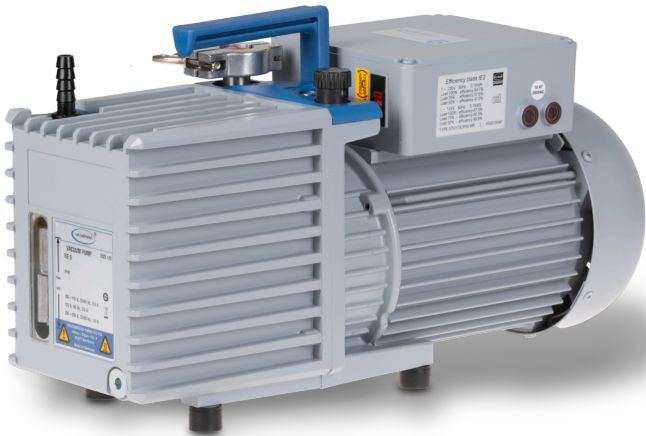

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com