

# Pompe à membrane MZ 2 NT

[Lien vers le site web](#)



## Description du produit

Ces pompes à membranes 100 % sans huile sont idéales pour le pompage et l'extraction des gaz sans contamination. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés offrent de larges possibilités d'utilisations pour les gaz non agressifs. La construction biétagée offre la combinaison avantageuse d'un débit élevé et d'un bon vide limite jusqu'à 7 mbar. Le système de double membranes FPM entoïlées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie. La nouvelle gamme NT se distingue par de nouvelles performances améliorées.

## Caractéristiques

- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- fonctionnement particulièrement silencieux
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien

## Référence de commande

| Désignation | Tension   fréquence nominales         | Type de fiche secteur | Référence |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| MZ 2 NT     | 230 V   50-60 Hz                      | CEE                   | 20732000  |
| MZ 2 NT     | 230 V   50-60 Hz                      | CH, CN                | 20732001  |
| MZ 2 NT     | 230 V   50-60 Hz                      | UK, IN                | 20732002  |
| MZ 2 NT     | 100-115 V   50-60 Hz<br>120 V   60 Hz | US                    | 20732003  |

## Livraison

Pompe complète, prête à l'emploi, silencieux, embout cranté, avec manuel d'utilisation.


## Accessoires

- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Vanne vacuomètre pour le vide ME / MZ / MD 4 / NT (20696840)
- Set de membranes et clapets MZ 2 NT / ME 4 NT + VARIO (20696860)


## Caractéristiques techniques

| Débit maximale 50 Hz (mbar)                                                                                                        | 2.2 m <sup>3</sup> /h                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Débit maximale 60 Hz (cfm)                                                                                                         | 1.4 cfm                                      |
| Vide limite                                                                                                                        | 7 mbar / 5.2 torr                            |
| Nombre de cylindres                                                                                                                | 2                                            |
| Nombre de d'étages                                                                                                                 | 2                                            |
| Température ambiante maxi admissible (service)                                                                                     | 10 - 40 °C                                   |
| Température ambiante maxi admissible (stockage)                                                                                    | -10 - 60 °C                                  |
| Pression max. à l'échappement (abs.)                                                                                               | 2 bar                                        |
| Raccord côté aspiration                                                                                                            | Embout DN 8-10 mm                            |
| Raccord côté pression                                                                                                              | G1/4"                                        |
| Puissance nominale du moteur                                                                                                       | 0.18 kW                                      |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                  |
| Classe de protection IP selon IEC 60529                                                                                            | IP 40                                        |
| Dimensions (L x P x H)                                                                                                             | 245 mm x 239 mm x 198 mm                     |
| Poids                                                                                                                              | 11.0 kg                                      |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/<br>62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA                                       |
| Conformité ATEX                                                                                                                    | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only |
| Certification NRTL                                                                                                                 | Oui                                          |


## Courbe débit à 50 Hz

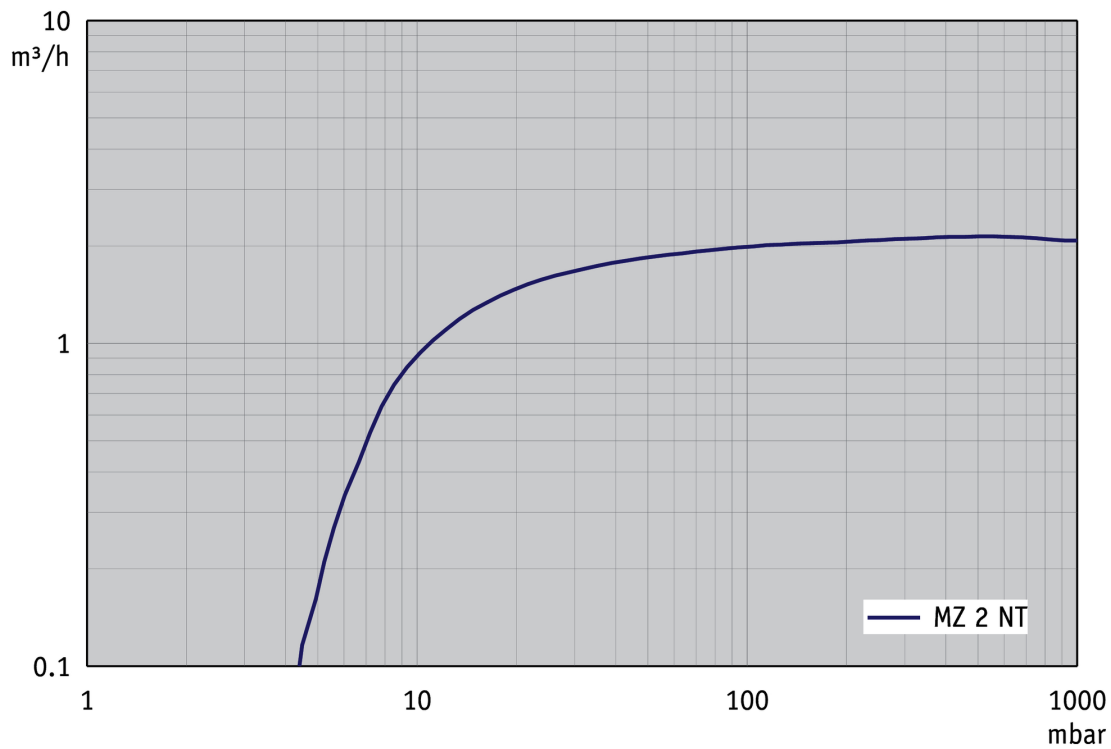


## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

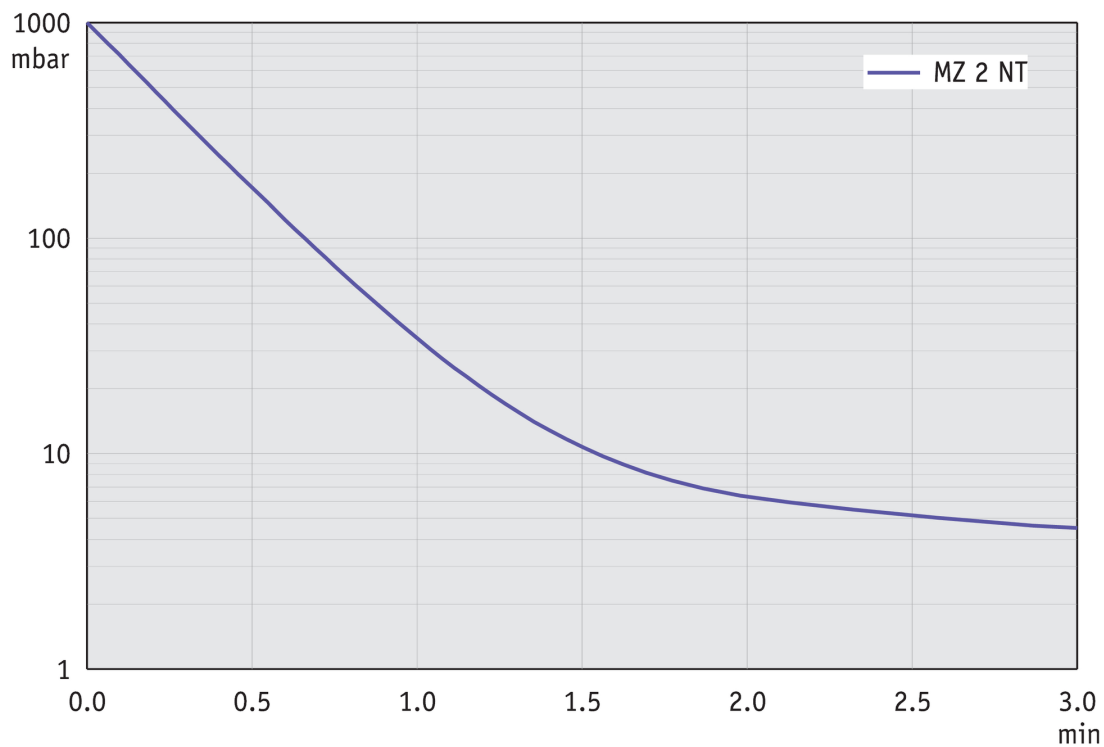


## Courbe de débit à 60 Hz

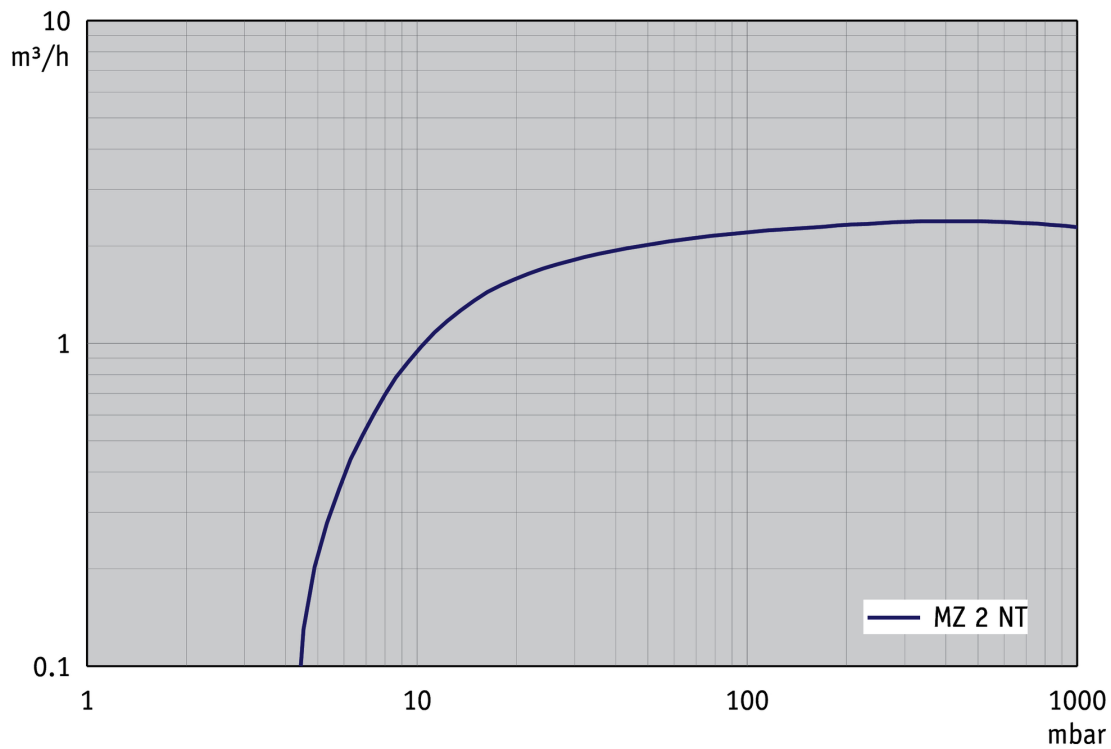

## Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

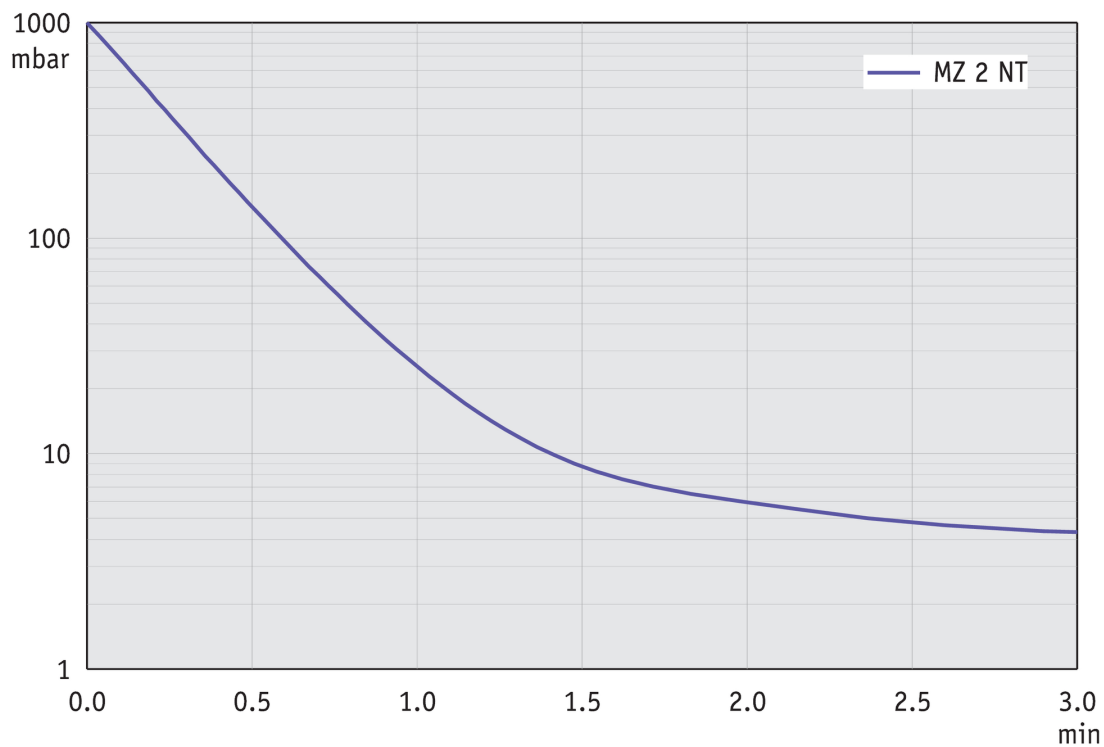

Plan de masse

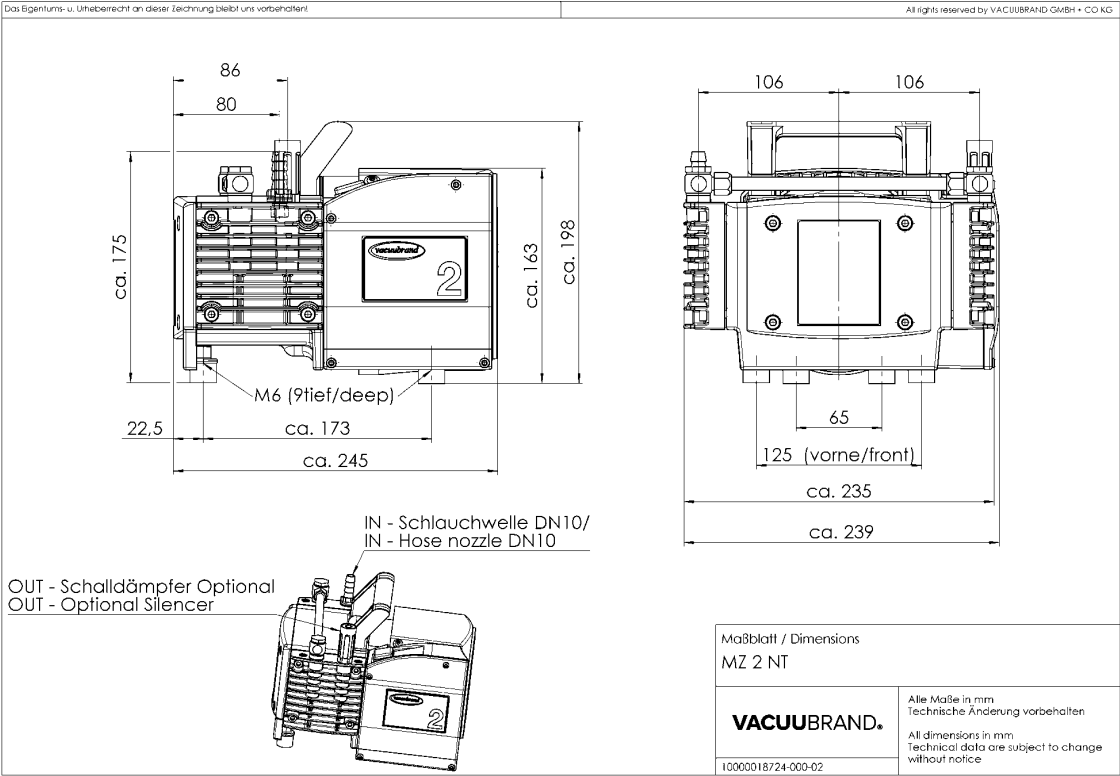

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com