

# Pompe à membrane « chimie » ME 1C

[Lien vers le site web](#)

## Description du produit

La filtration sous vide est une application fréquente pour la préparation d'échantillon en chimie, microbiologie, contrôle des eaux usées et d'autres process analytiques. Grâce à leur fonctionnalité conviviale, leur compacité et leur puissance, la nouvelle pompe à membrane ME 1C est les partenaires idéales pour la filtration monoposte et les dispositifs d'aspirations multiples. Développées sur la technologie éprouvée des pompes à membrane MD 1 et MD 1C, ces pompes 100 % sans huile se distinguent par l'exceptionnelle durée de vie de leur membrane. Le design ergonomique avec l'interrupteur sur le dessus de la pompe permet une utilisation aisée. La construction compacte permet de gagner de la place sur la paillasse. Les clapets et membranes en PTFE sont robustes et chimiquement résistants. En option, une vanne manuelle avec vacuomètre permet un réglage précis et continu du débit.

## Caractéristiques

- manipulation aisée avec l'interrupteur positionné sur le boîtier
- fonctionnement très silencieux
- encombrement minimum sur la paillasse
- très grande durée de vie des membranes, pratiquement sans entretien
- résistance chimique très élevée

## Référence de commande

| Désignation | Tension   fréquence nominales | Type de fiche secteur | Référence |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| ME 1C       | 220-230 V   50-60 Hz          | CEE                   | 20721100  |

## Livraison

Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation


## Accessoires

- Set de membranes et clapets ME 1, ME 1C, VP 100, VP 100C (20696874)
- Silencieux avec tuyau 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Régulateur d'air avec manomètre ME 1C (20696843)


## Caractéristiques techniques

| Débit maximale 50 Hz (mbar)                                                                                                        | 0.7 m <sup>3</sup> /h                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Débit maximale 60 Hz (cfm)                                                                                                         | 0.5 cfm                                      |
| Vide limite                                                                                                                        | 100 mbar / 75 torr                           |
| Nombre de cylindres                                                                                                                | 1                                            |
| Nombre de d'étages                                                                                                                 | 1                                            |
| Température ambiante maxi admissible (service)                                                                                     | 10 - 40 °C                                   |
| Température ambiante maxi admissible (stockage)                                                                                    | -10 - 60 °C                                  |
| Pression max. à l'échappement (abs.)                                                                                               | 1.1 bar                                      |
| Raccord côté aspiration                                                                                                            | Embout DN 8-10 mm                            |
| Raccord côté pression                                                                                                              | Embout DN 8-10 mm                            |
| Puissance nominale du moteur                                                                                                       | 0.04 kW                                      |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                  |
| Classe de protection IP selon IEC 60529                                                                                            | IP 40                                        |
| Dimensions (L x P x H)                                                                                                             | 270 mm x 121 mm x 154 mm                     |
| Poids                                                                                                                              | 5.4 kg                                       |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/<br>62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 49 dBA                                       |
| Conformité ATEX                                                                                                                    | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only |
| Certification NRTL                                                                                                                 | Oui                                          |


## Courbe débit à 50 Hz

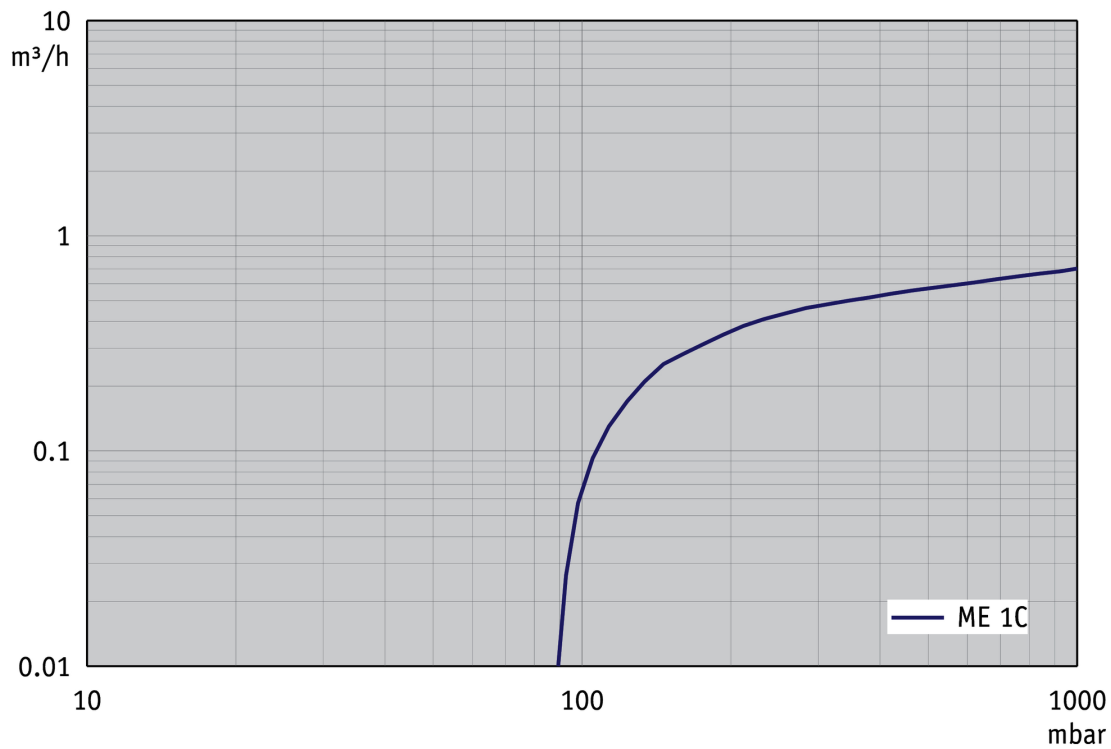


## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

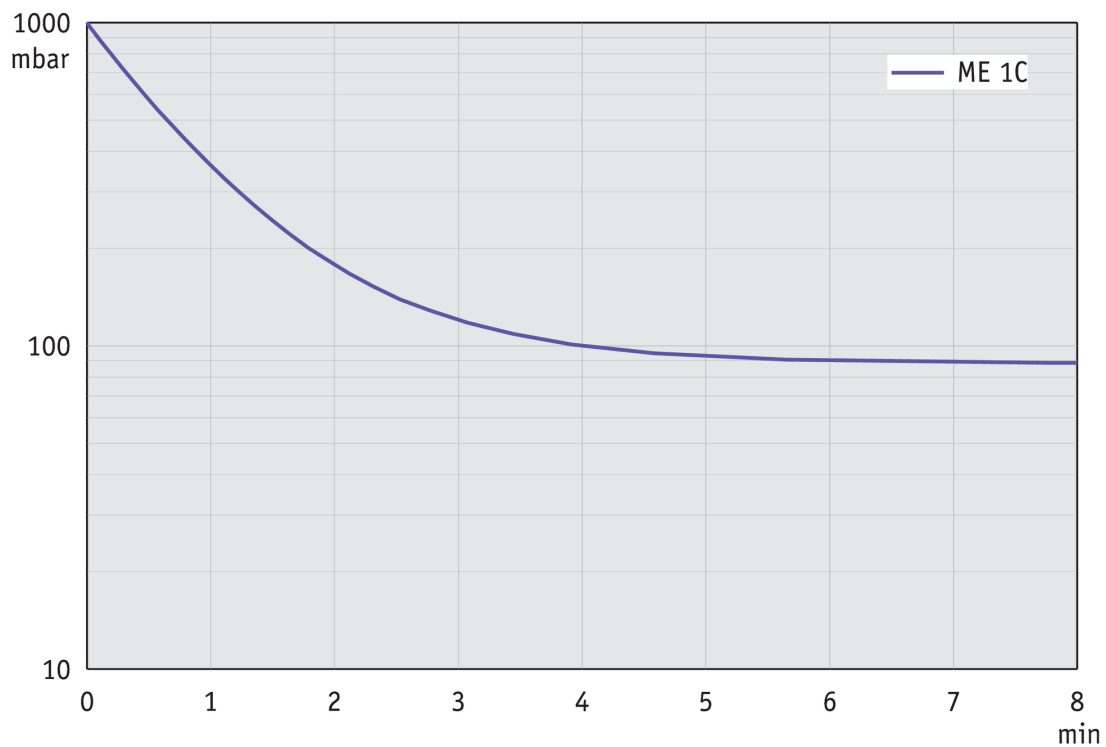


### Courbe de débit à 60 Hz

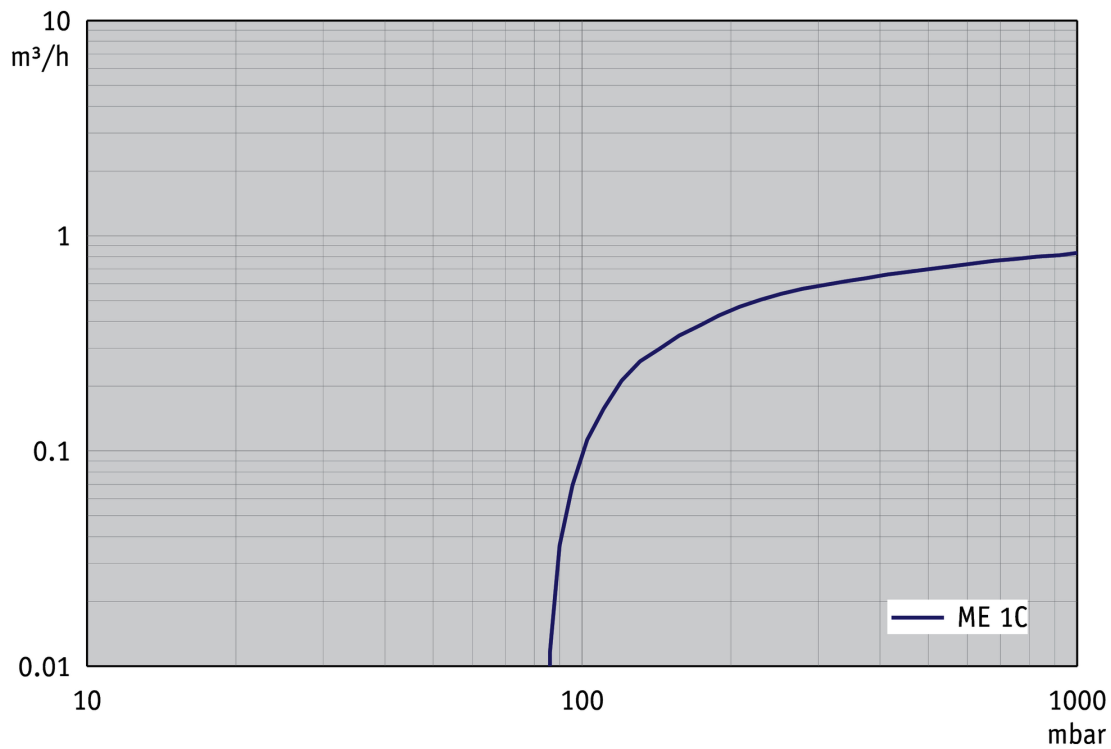

### Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

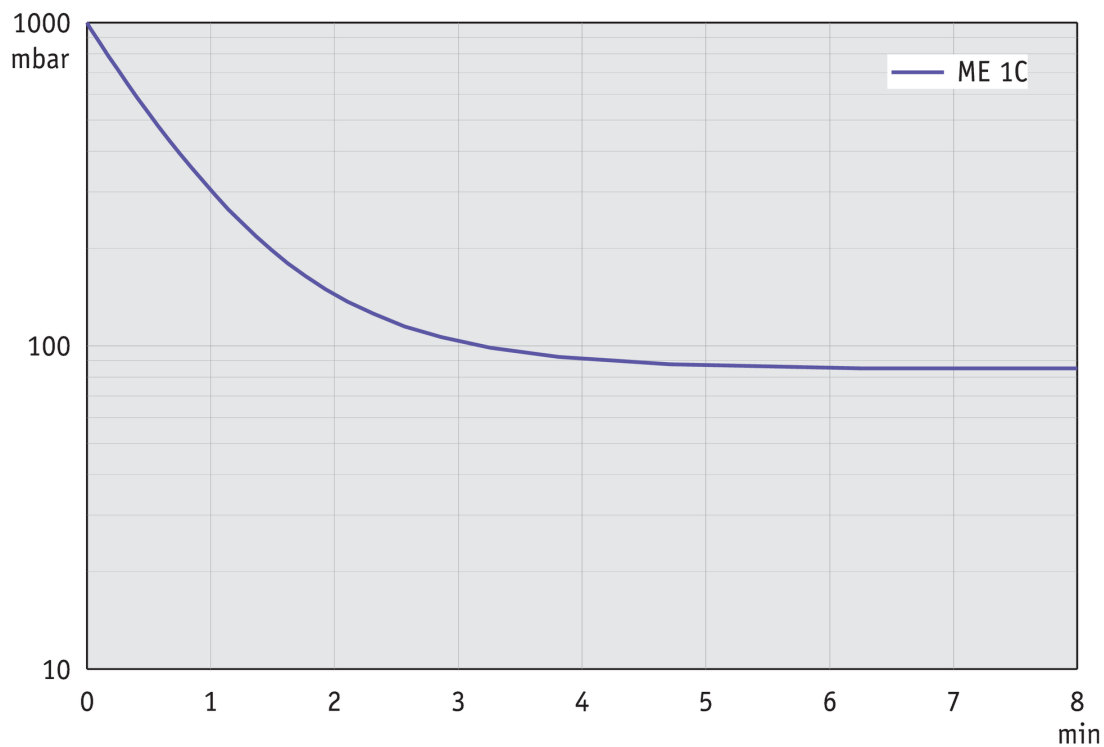

Plan de masse

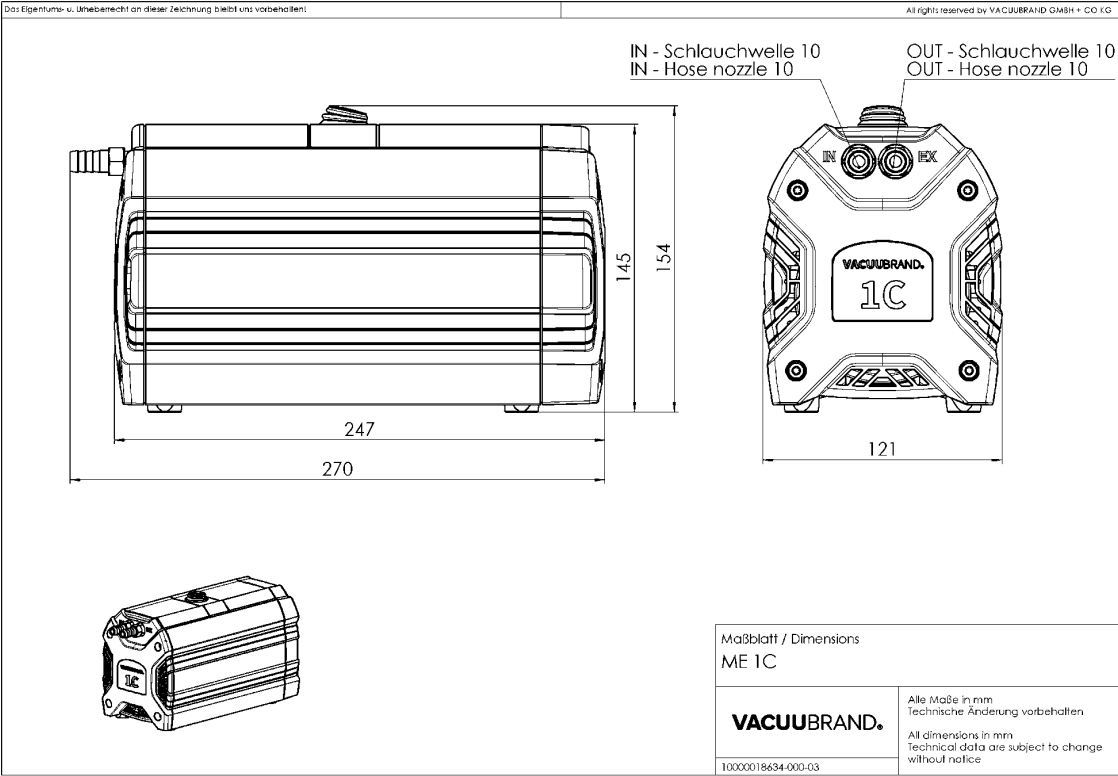

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com