

# Pompe à membrane ME 2 NT

[Lien vers le site web](#)



## Description du produit

Les pompes à membrane monoétagées sont une excellente solution pour le pompage en continu, 100% sans huile, de gaz et de vapeurs qui ne requièrent pas un niveau de vide poussé. Contrairement aux trompes eau, elles ne consomment aucun fluide et ne génère pas d'eau contaminée. Les applications typiques sont les étuves à vide, les postes de filtration simples ou multiples avec une production moyenne et pour toute aspiration de gaz et de descente en vide. La construction monoétagée apporte l'avantage d'un débit élevé avec un vide limite jusqu'à 70 mbar.

## Caractéristiques

- très silencieux
- puissant, même pour plusieurs filtrations en parallèle
- débit élevé même proche du vide limite
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien

## Référence de commande

| Désignation | Tension   fréquence nominales         | Type de fiche secteur | Référence |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| ME 2 NT     | 100-115 V   50-60 Hz<br>120 V   60 Hz | US                    | 20730003  |

## Livraison

Pompe complète, prête à l'emploi, silencieux, embout cranté, avec manuel d'utilisation.


## Accessoires

- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Vanne vacuomètre pour le vide ME / MZ / MD 4 / NT (20696840)
- Set de membranes et clapets ME 2 NT (20696877)


## Caractéristiques techniques

| Débit maximale 50 Hz (mbar)                                                                                                        | 2 m <sup>3</sup> /h         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Débit maximale 60 Hz (cfm)                                                                                                         | 1.4 cfm                     |
| Vide limite                                                                                                                        | 70 mbar / 52 torr           |
| Nombre de cylindres                                                                                                                | 1                           |
| Nombre de d'étages                                                                                                                 | 1                           |
| Température ambiante maxi admissible (service)                                                                                     | 10 - 40 °C                  |
| Température ambiante maxi admissible (stockage)                                                                                    | -10 - 60 °C                 |
| Pression max. à l'échappement (abs.)                                                                                               | 2 bar                       |
| Raccord côté aspiration                                                                                                            | Embout DN 8-10 mm           |
| Raccord côté pression                                                                                                              | G1/4"                       |
| Puissance nominale du moteur                                                                                                       | 0.18 kW                     |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup> |
| Classe de protection IP selon IEC 60529                                                                                            | IP 40                       |
| Dimensions (L x P x H)                                                                                                             | 245 mm x 211 mm x 198 mm    |
| Poids                                                                                                                              | 10.2 kg                     |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/<br>62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 45 dBA                      |
| Certification NRTL                                                                                                                 | Oui                         |


## Courbe débit à 50 Hz

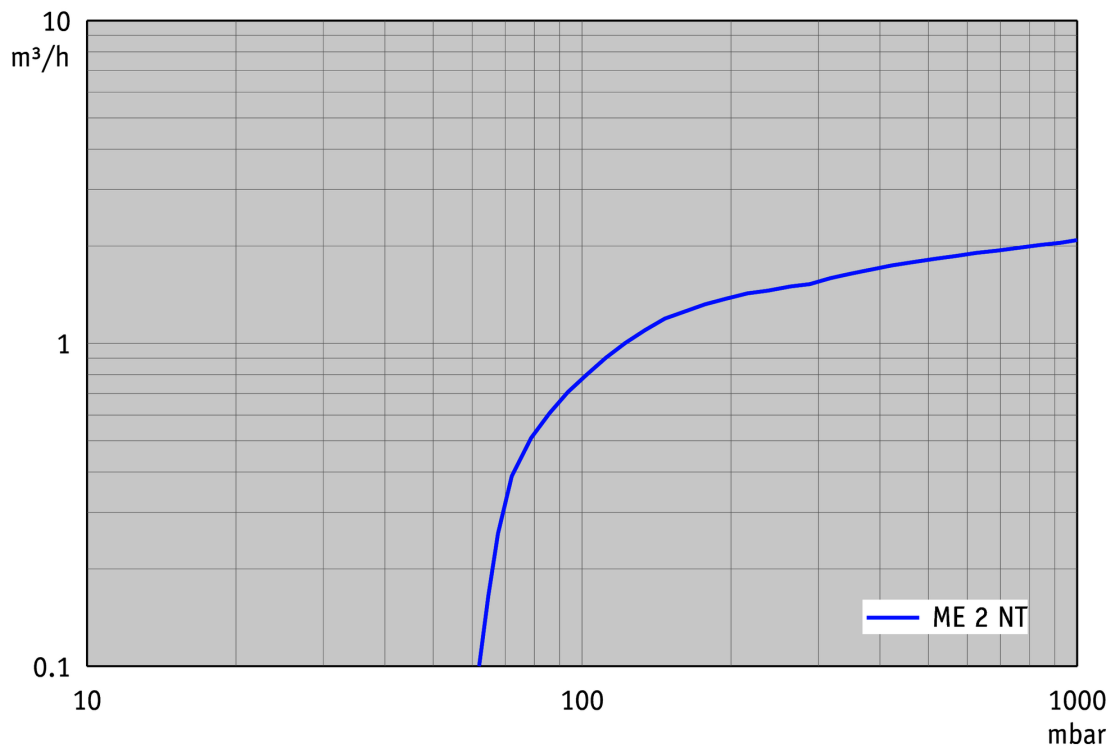


## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

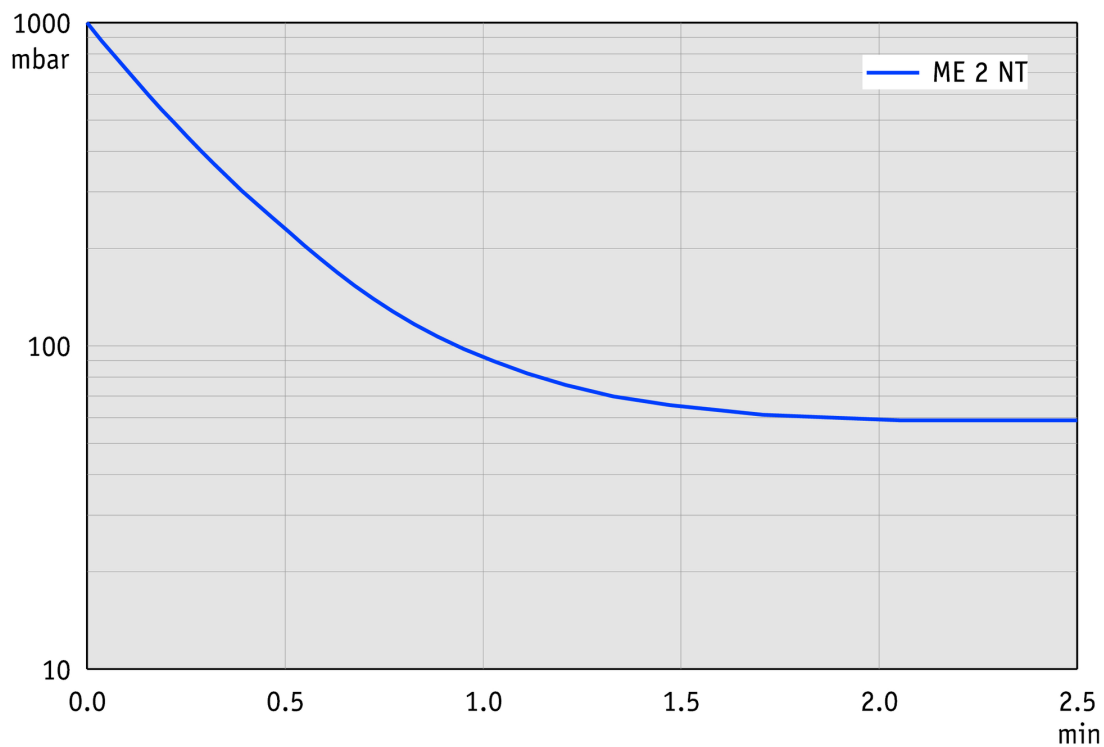


## Courbe de débit à 60 Hz

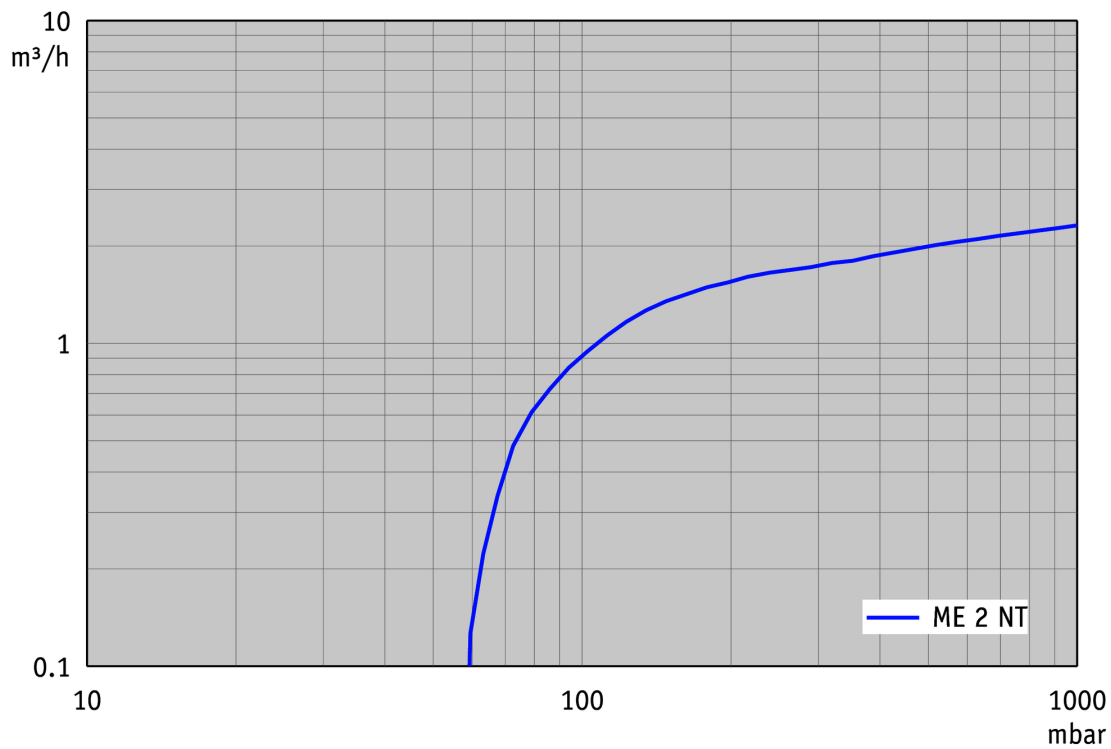

## Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

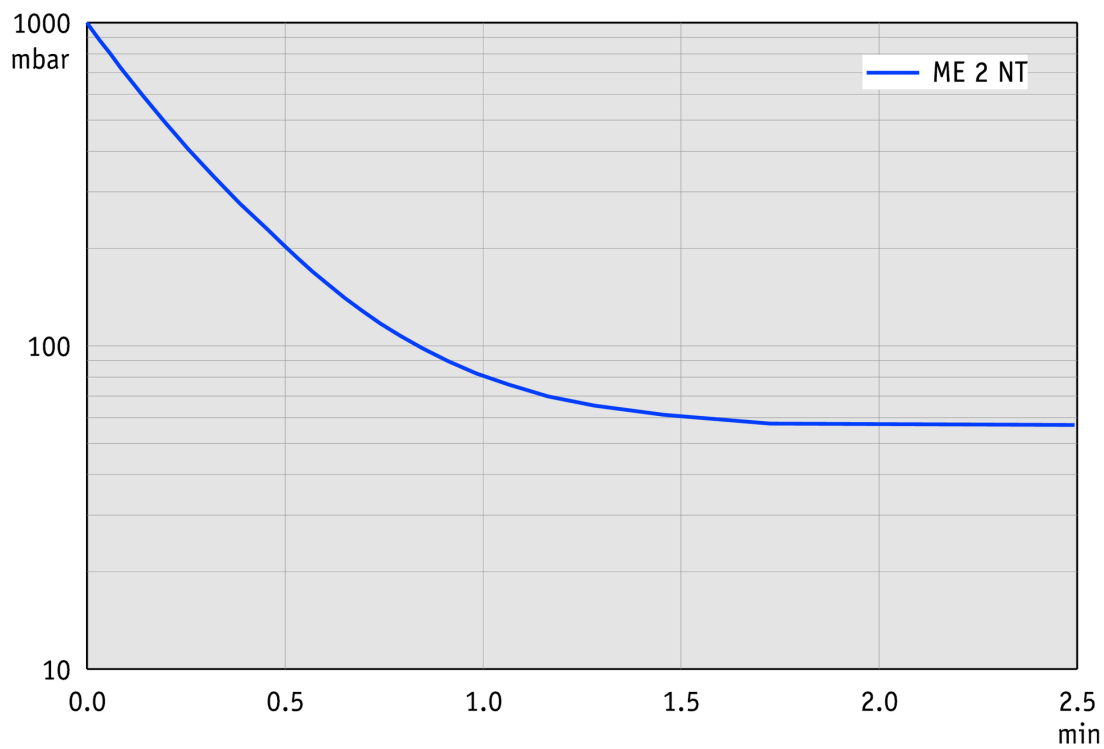

Plan de masse

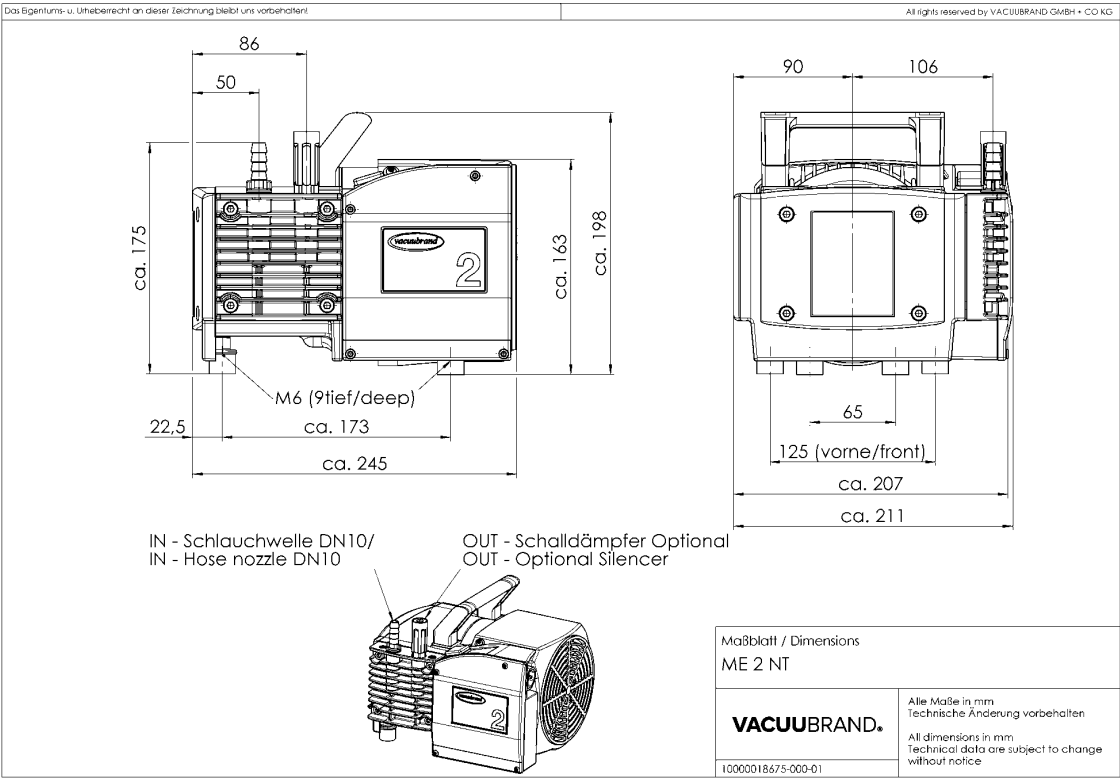

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com