

Groupe de pompage « chimie » PC 520 select

Lien vers le site web



Description du produit

Ce groupe de pompage est une solution compacte à l'efficacité prouvée pour la réalisation en parallèle de deux process indépendants avec une seule pompe. La pompe de base est le modèle MZ 2C NT, qui satisfait aux exigences de vide de laboratoire moyennes pour la plupart des solvants. Chaque raccord de vide est doté d'une vanne pour la régulation électronique du vide. Les deux raccords de vide sont munis de clapets antiretour contre les influences réciproques. L'interface utilisateur graphique du régulateur de vide VACUU·SELECT intégré vous permet de sélectionner des process de vide prédéfinis pour toutes les applications de laboratoire courantes et de commander les deux électrovannes. Bien entendu, vous pouvez aussi personnaliser l'application, la valeur de vide souhaitée et bien d'autres paramètres, ainsi que les configurer différemment pour chacun des process raccordés. Le séparateur en verre avec dispositif de protection et monté côté aspiration retient les particules ainsi que les liquides. Très écologique, le condenseur de vapeur monté côté pression permet une récupération des solvants proche des 100 %.

Caractéristiques

- Régulateur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique qui simplifie l'utilisation au laboratoire
- applications prédéfinies, pour un gain de temps et des résultats reproductibles
- éditeur d'applications facile à utiliser pour personnaliser les process
- pompe à vide puissante possédant une excellente résistance aux produits chimiques et aux condensats
- PC 520 select, pour le fonctionnement de deux applications en parallèle, avec régulation électronique

Référence de commande

Désignation	Tension fréquence nominales	Type de fiche secteur	Référence
PC 520 select	230 V 50-60 Hz	CEE	20733350
PC 520 select	230 V 50-60 Hz	CH	20733351
PC 520 select	230 V 50-60 Hz	UK	20733352
PC 520 select	100-115 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	US	20733353
PC 520 select	230 V 50-60 Hz	CN	20733356
PC 520 select	230 V 50-60 Hz	IN	20733357

Livraison

Groupe de pompage complet, prêt à l'emploi, avec manuel d'utilisation.


Accessoires

- Extension des fonctions du régulateur VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Silencieux avec tuyau 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Capteur de niveau de remplissage pour ballon rond 500 ml (20699908)
- Électrovanne de gestion de l'eau de refroidissement VKW-B (20674220)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)


Caractéristiques techniques

Débit maximale 50 Hz (mbar)	2 m³/h
Débit maximale 60 Hz (cfm)	1.4 cfm
Vide limite	7 mbar / 5 torr
Vide limite avec lest d'air	12 mbar / 9 torr
Nombre de cylindres	2
Nombre de d'étages	2
Type d'affichage / de contrôleur de vide	VACUU·SELECT
Température ambiante maxi admissible (service)	10 - 40 °C
Température ambiante maxi admissible (stockage)	-10 - 60 °C
Pression max. à l'échappement (abs.)	1.1 bar
Raccord côté aspiration	2 x Embout DN 8-10 mm
Raccord côté pression	Embout DN 8-10 mm
Raccord de l'eau de refroidissement	2 x embout DN 6-8 mm
Puissance nominale du moteur	0.18 kW
Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz	1500/1800 min ⁻¹
Classe de protection IP selon IEC 60529	IP 20
Dimensions (L x P x H)	435 mm x 272 mm x 457 mm
Poids	19.6 kg
Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/ 62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®)	45 dBA
Certification NRTL	Non
Interface	Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required)


Courbe débit à 50 Hz

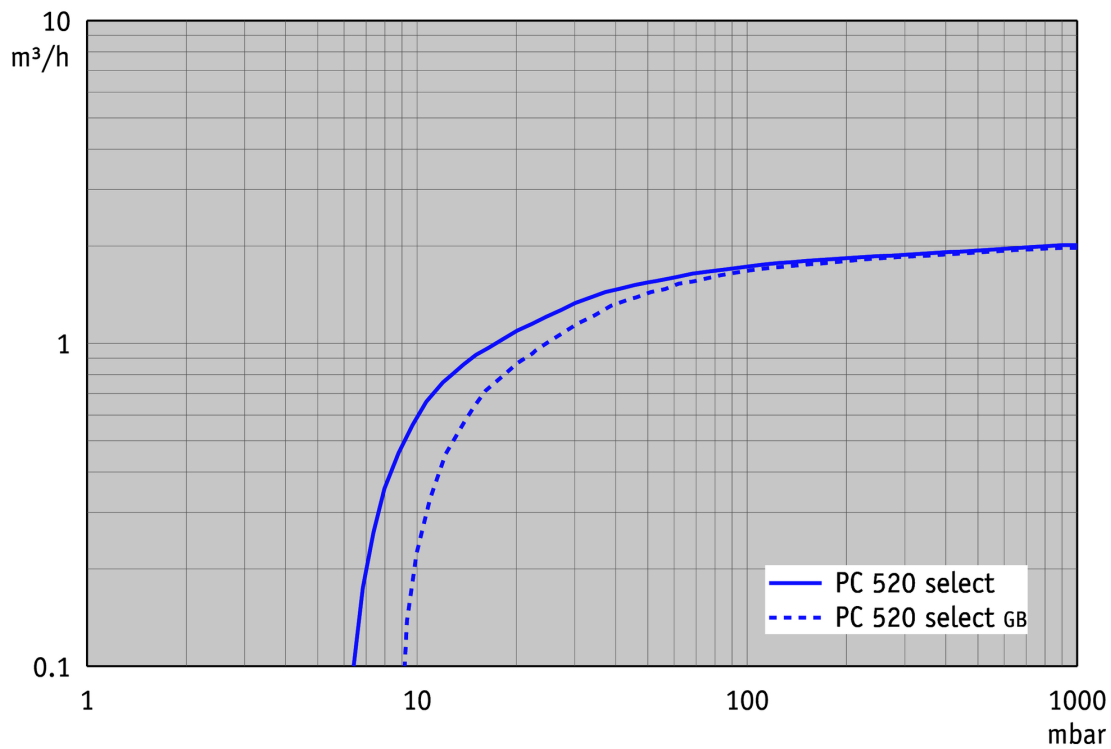


Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

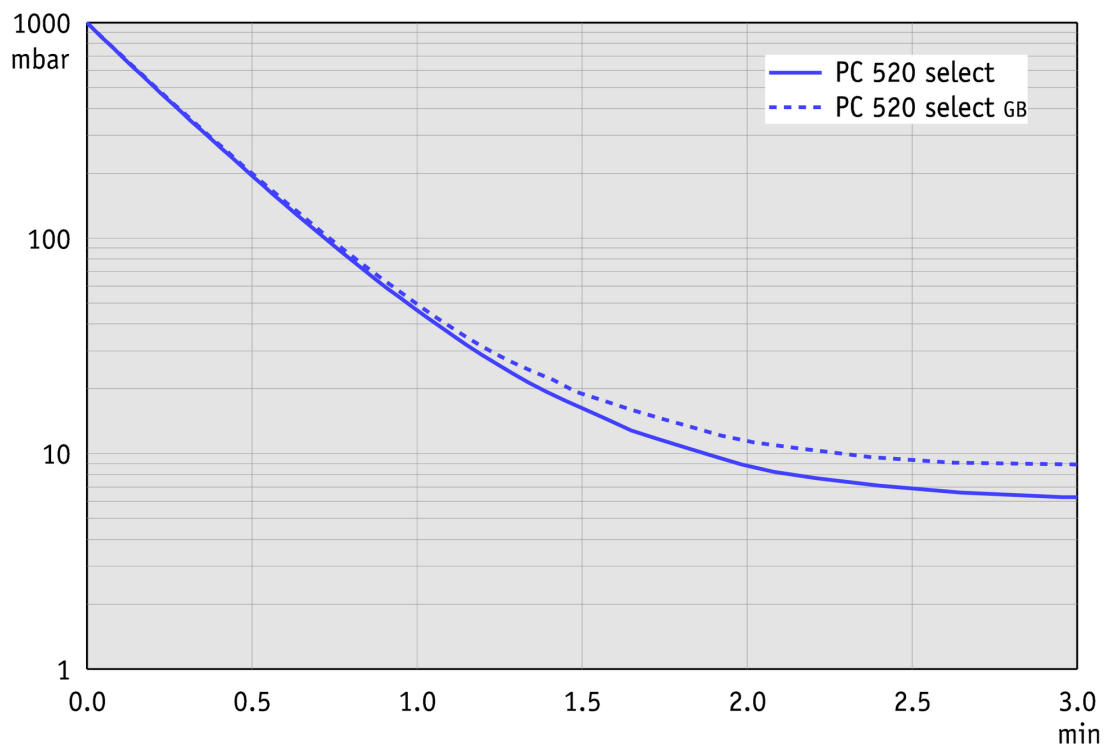


Courbe de débit à 60 Hz

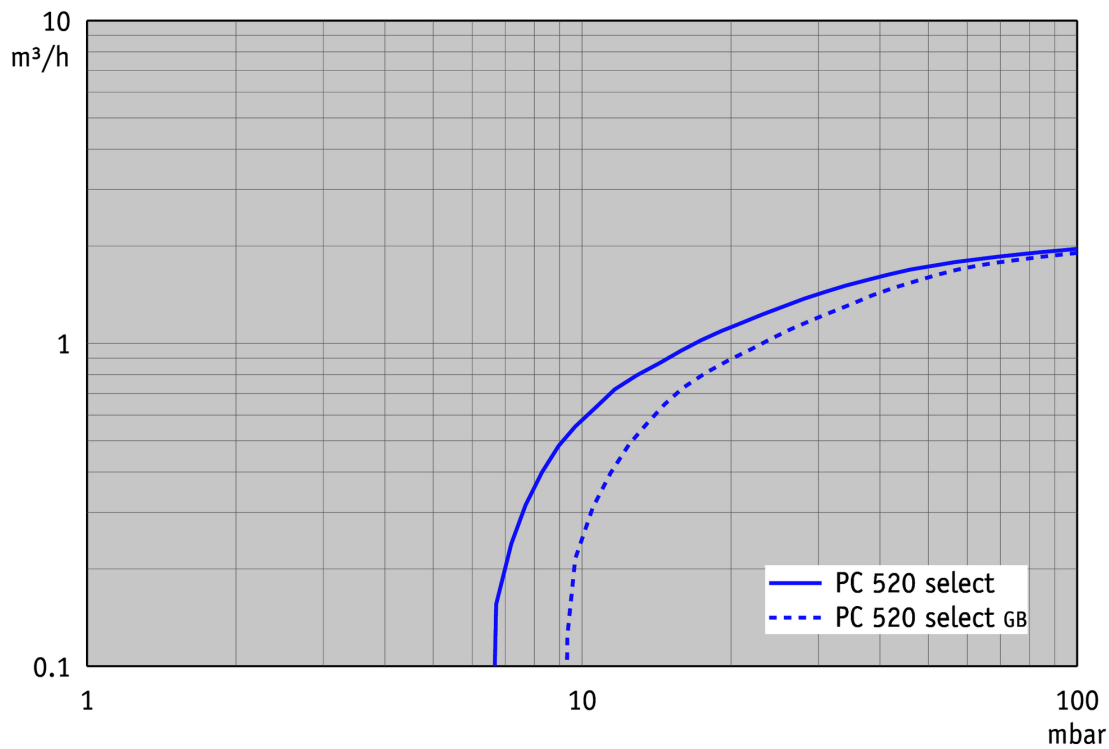

Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

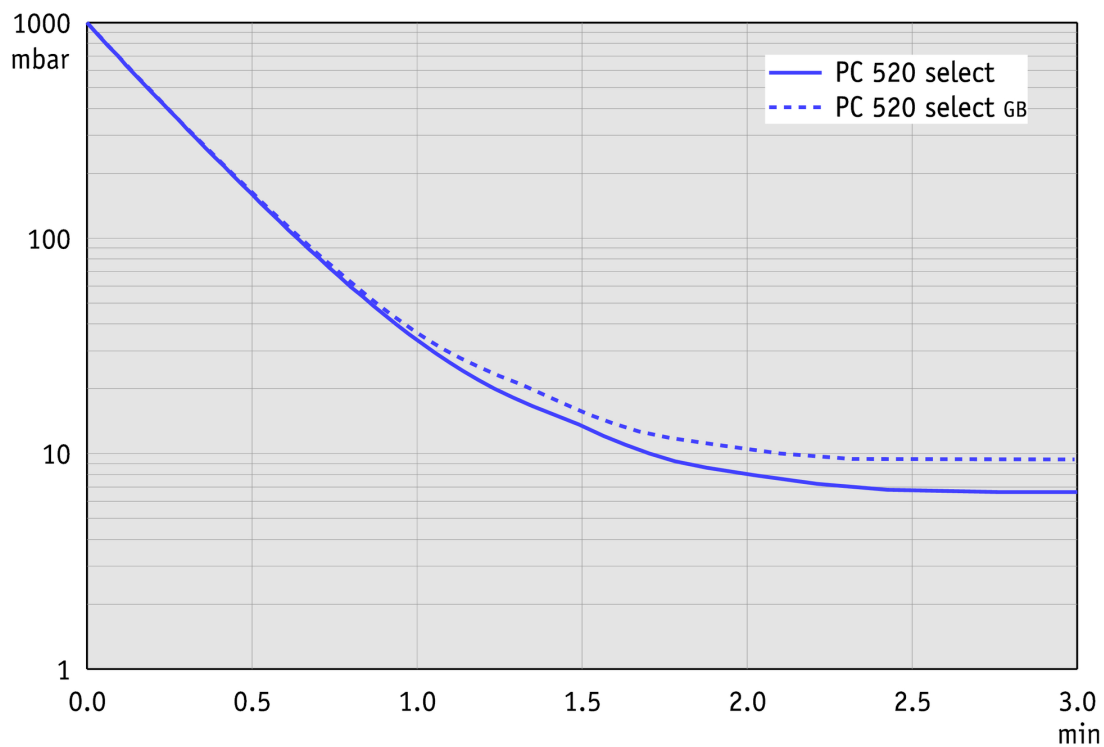

Plan de masse

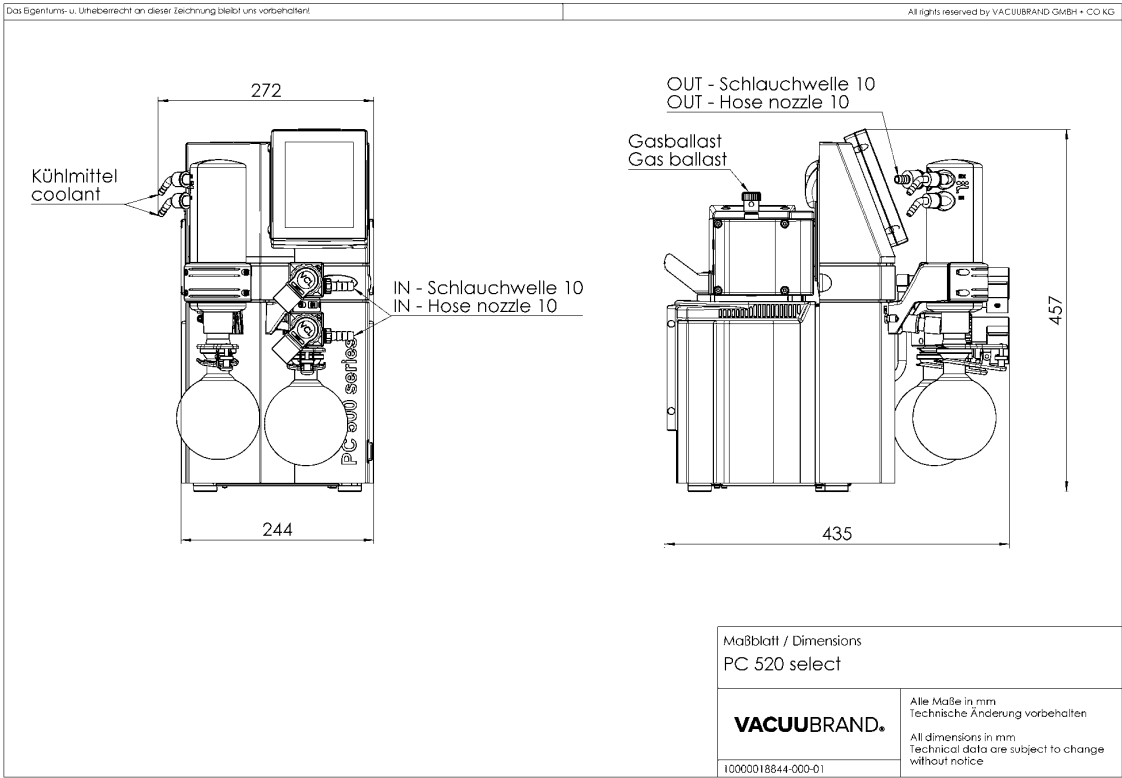

VACUUBRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

All with one goal:

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com