

Pompe à membrane « chimie » VARIO® MZ 2C VARIO select

[Lien vers le site web](#)



Description du produit

Les pompes VARIO permettent une régulation précise du vide par le réglage de la vitesse de la pompe à vide. La pompe MZ 2C VARIO satisfait aux exigences moyennes du vide de laboratoire pour la plupart des solvants. L'interface utilisateur graphique du régulateur de vide VACUU-SELECT vous permet de sélectionner des process de vide prédéfinis pour toutes les applications de laboratoire courantes. En cas d'évaporation de solvants, l'appareil détecte automatiquement la pression d'ébullition et adapte le déroulement du process sans intervention de l'utilisateur. Bien entendu, vous pouvez aussi personnaliser l'application, la valeur de vide souhaitée et bien d'autres paramètres. En outre, le fonctionnement adapté aux besoins augmente considérablement la durée de vie des membranes.

Caractéristiques

- Régulateur de vide VACUU-SELECT avec interface utilisateur graphique et process de vide prédéfinis, qui simplifient l'utilisation au laboratoire
- détection automatique du point d'ébullition et réglage du vide pour des temps de process courts
- longévité incomparable de la membrane, pour des coûts d'exploitation et de maintenance minimales
- résistance chimique élevée

Référence de commande

Désignation	Tension fréquence nominales	Type de fiche secteur	Référence
MZ 2C VARIO select	200-230 V 50-60 Hz	CEE	20732450
MZ 2C VARIO select	200-230 V 50-60 Hz	CH	20732451
MZ 2C VARIO select	100-120 V 50-60 Hz	US	20732453
MZ 2C VARIO select	200-230 V 50-60 Hz	CN	20732456
MZ 2C VARIO select	200-230 V 50-60 Hz	IN	20732457

Livraison

Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation.


Accessoires

- Extension des fonctions du régulateur VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Silencieux avec tuyau 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)


Caractéristiques techniques

Débit maximale 50 Hz (mbar)	2.8 m³/h
Débit maximale 60 Hz (cfm)	1.65 cfm
Vide limite	7 mbar / 5 torr
Vide limite avec lest d'air	12 mbar / 9 torr
Nombre de cylindres	2
Nombre de d'étages	2
Type d'affichage / de contrôleur de vide	VACUU-SELECT
Température ambiante maxi admissible (service)	10 - 40 °C
Température ambiante maxi admissible (stockage)	-10 - 60 °C
Pression max. à l'échappement (abs.)	1.1 bar
Raccord côté aspiration	Embout DN 8-10 mm
Raccord côté pression	Embout DN 8-10 mm
Puissance nominale du moteur	0.53 kW
Plage de vitesse de rotation	30 - 2400 min ⁻¹
Classe de protection IP selon IEC 60529	IP 20
Dimensions (L x P x H)	243 mm x 243 mm x 245 mm
Poids	14.3 kg
Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/ 62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®)	43 dBA
Conformité ATEX	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only
Certification NRTL	Non
Interface	Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required)


Courbe débit à 50 Hz

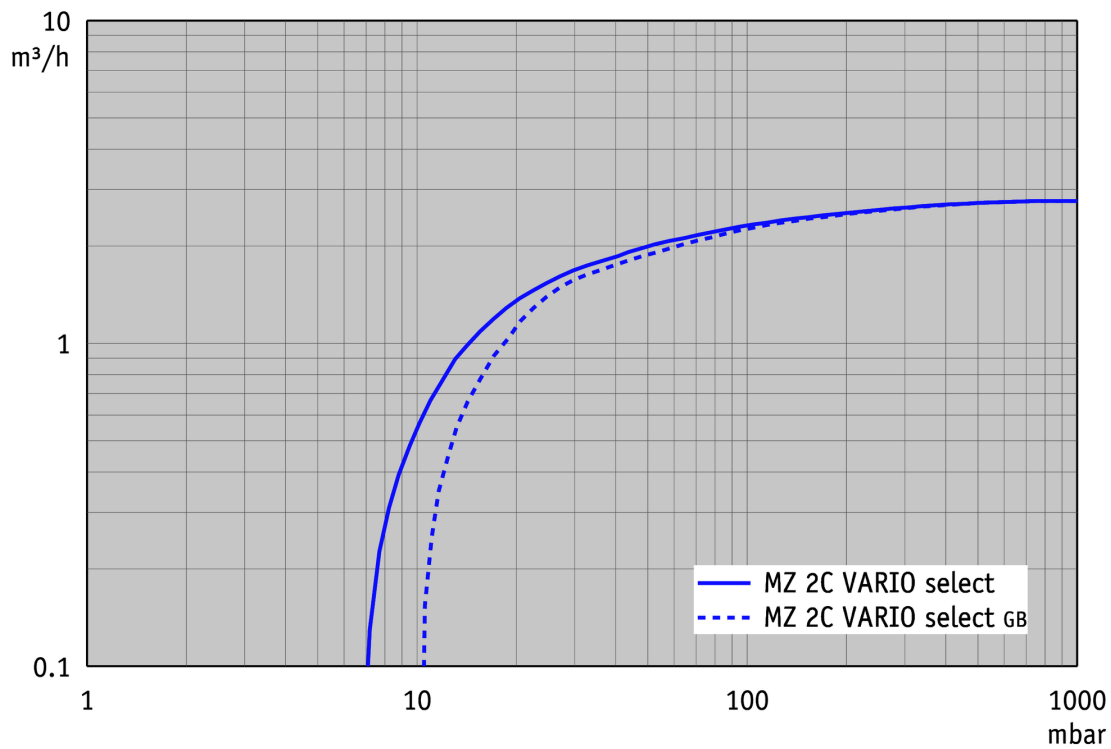

Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

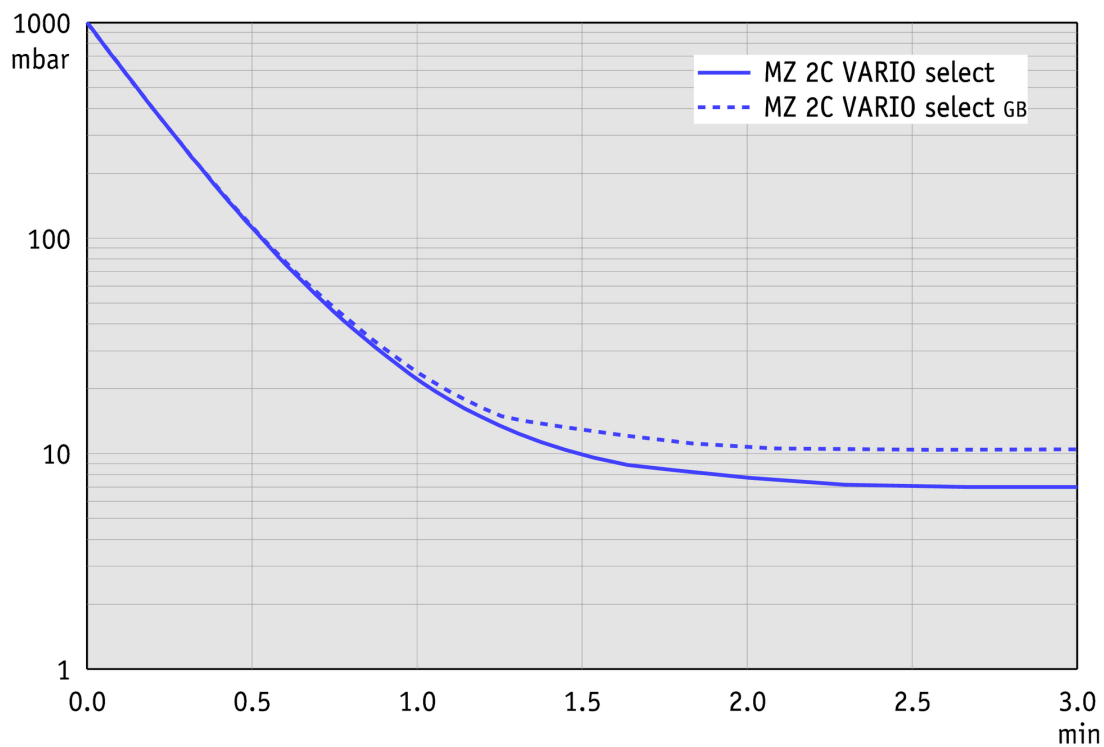

Plan de masse

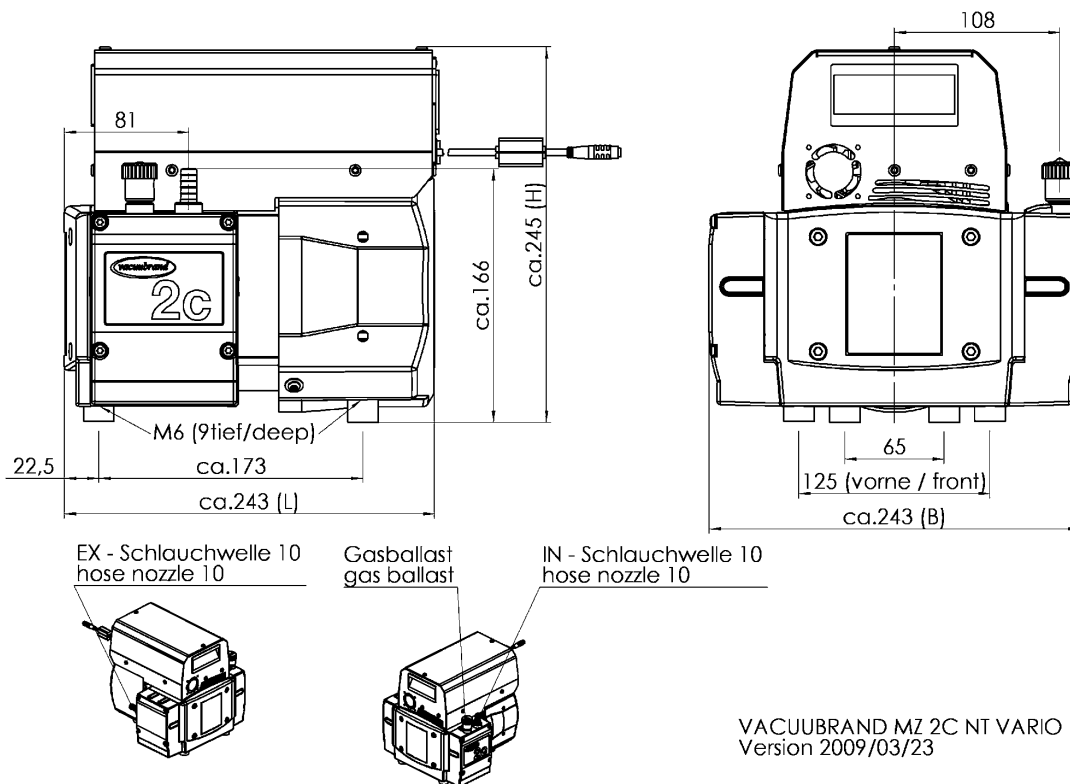

VACUUBRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

All with one goal:

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com