

# Groupe de pompage « chimie » PC 510 select

[Lien vers le site web](#)



## Description du produit

De par son concept, ce groupe de pompage s'avère parfait pour la production et la régulation du vide pour de nombreux process d'évaporation. La pompe de base est le modèle MZ 2C NT, qui satisfait aux exigences de vide de laboratoire moyennes pour la plupart des solvants. L'interface utilisateur graphique du régulateur de vide VACUU-SELECT intégré vous permet de sélectionner des process de vide prédéfinis pour toutes les applications de laboratoire courantes. En cas d'évaporation de solvants, le VACUU-SELECT détecte automatiquement la pression d'ébullition et active la régulation à deux points. Bien entendu, vous pouvez aussi personnaliser l'application, la valeur de vide souhaitée et bien d'autres paramètres. Le séparateur en verre avec dispositif de protection et monté côté aspiration retient les particules ainsi que les gouttes de liquide. Très écologique, le condenseur de vapeur monté côté pression permet une récupération des solvants proche des 100 %.

## Caractéristiques

- Régulateur de vide VACUU-SELECT avec interface utilisateur graphique qui simplifie l'utilisation au laboratoire
- applications prédéfinies, pour un gain de temps et des résultats reproductibles
- éditeur d'applications facile à utiliser pour personnaliser les process
- pompe à vide puissante possédant une excellente résistance aux produits chimiques et aux condensats
- excellente écocompatibilité grâce à une récupération efficace des solvants

## Référence de commande

| Désignation   | Tension   fréquence nominales | Type de fiche secteur | Référence |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| PC 510 select | 230 V   50-60 Hz              | UK                    | 20733152  |

## Livraison

Groupe de pompage complet, prêt à l'emploi, avec manuel d'utilisation.


## Accessoires

- Extension des fonctions du régulateur VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Silencieux avec tuyau 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Module VACUU LAN DN 10/8 mm (20637873)
- Tuyau à vide, transparent DN 8 mm (20686061)
- Capteur de niveau de remplissage pour ballon rond 500 ml (20699908)
- Électrovanne de gestion de l'eau de refroidissement VKW-B (20674220)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Set de membranes et clapets MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)


## Caractéristiques techniques

| Débit maximale 50 Hz (mbar)                                                                                                        | 2 m <sup>3</sup> /h                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit maximale 60 Hz (cfm)                                                                                                         | 1.4 cfm                                                                                                          |
| Vide limite                                                                                                                        | 7 mbar / 5 torr                                                                                                  |
| Vide limite avec lest d'air                                                                                                        | 12 mbar / 9 torr                                                                                                 |
| Nombre de cylindres                                                                                                                | 2                                                                                                                |
| Nombre de d'étages                                                                                                                 | 2                                                                                                                |
| Type d'affichage / de contrôleur de vide                                                                                           | VACUU·SELECT                                                                                                     |
| Température ambiante maxi admissible (service)                                                                                     | 10 - 40 °C                                                                                                       |
| Température ambiante maxi admissible (stockage)                                                                                    | -10 - 60 °C                                                                                                      |
| Pression max. à l'échappement (abs.)                                                                                               | 1.1 bar                                                                                                          |
| Raccord côté aspiration                                                                                                            | Embout DN 8-10 mm                                                                                                |
| Raccord côté pression                                                                                                              | Embout DN 8-10 mm                                                                                                |
| Raccord de l'eau de refroidissement                                                                                                | 2 x embout DN 6-8 mm                                                                                             |
| Puissance nominale du moteur                                                                                                       | 0.18 kW                                                                                                          |
| Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                                                                                      |
| Classe de protection IP selon IEC 60529                                                                                            | IP 20                                                                                                            |
| Dimensions (L x P x H)                                                                                                             | 418 mm x 272 mm x 457 mm                                                                                         |
| Poids                                                                                                                              | 17.6 kg                                                                                                          |
| Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/<br>62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA                                                                                                           |
| Conformité ATEX                                                                                                                    | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only                                                                     |
| Certification NRTL                                                                                                                 | Non                                                                                                              |
| Interface                                                                                                                          | Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required) |


## Courbe débit à 50 Hz

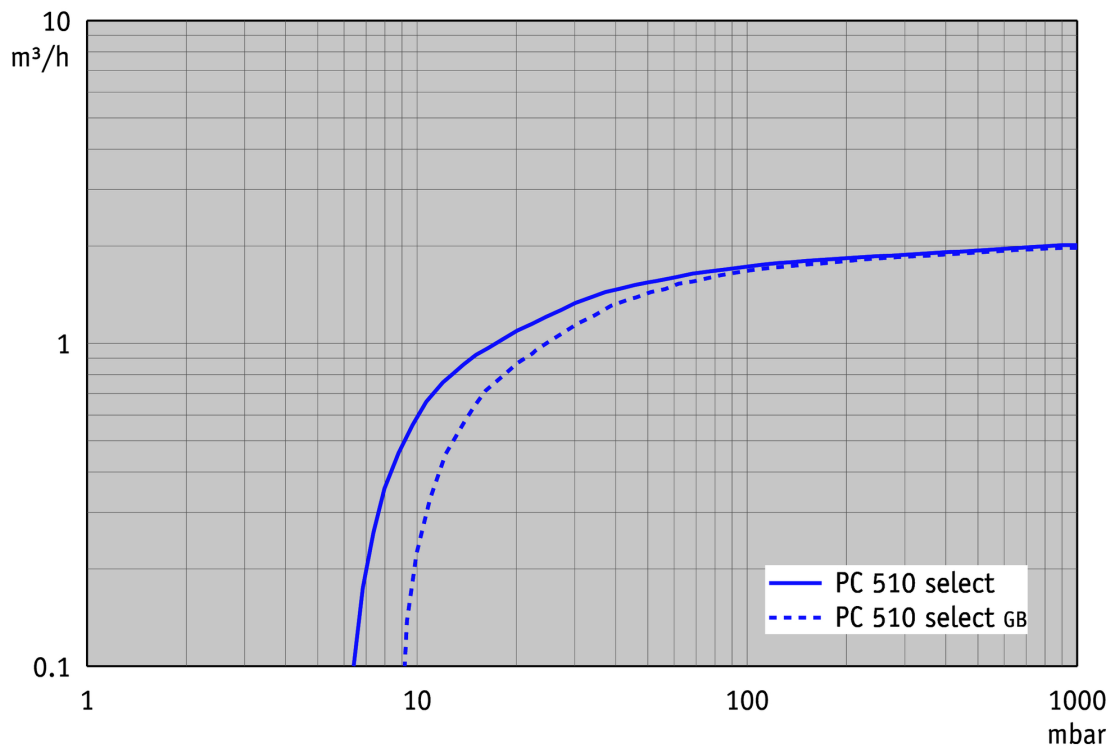


## Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

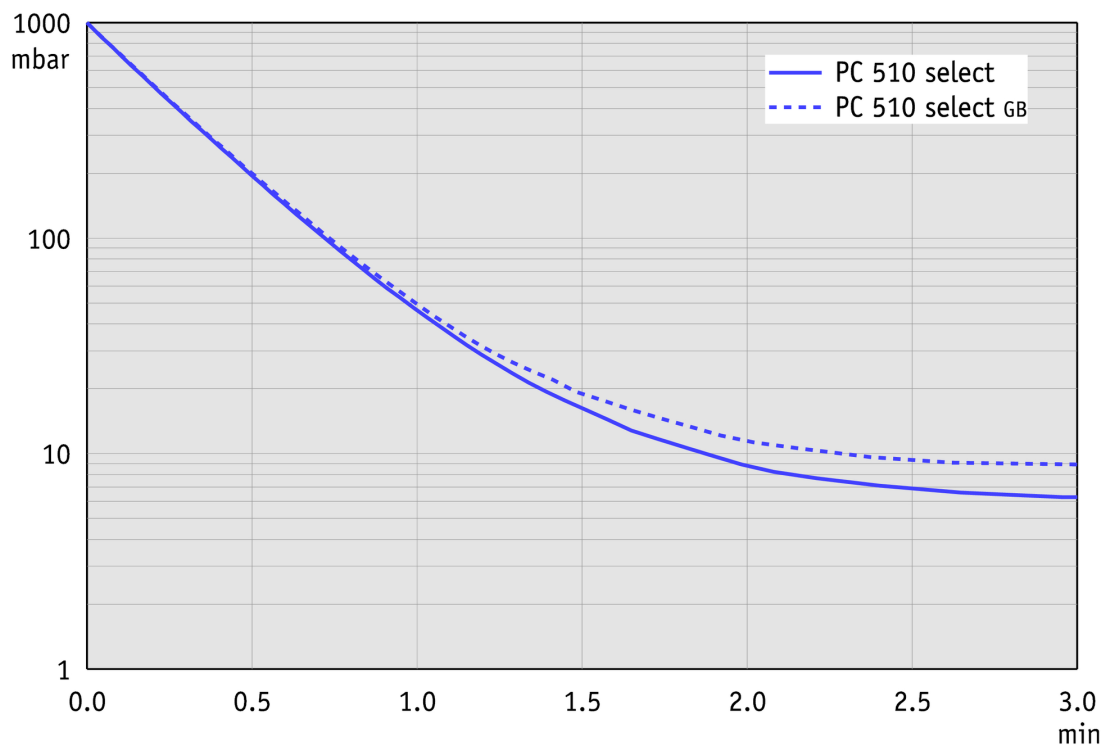


## Courbe de débit à 60 Hz

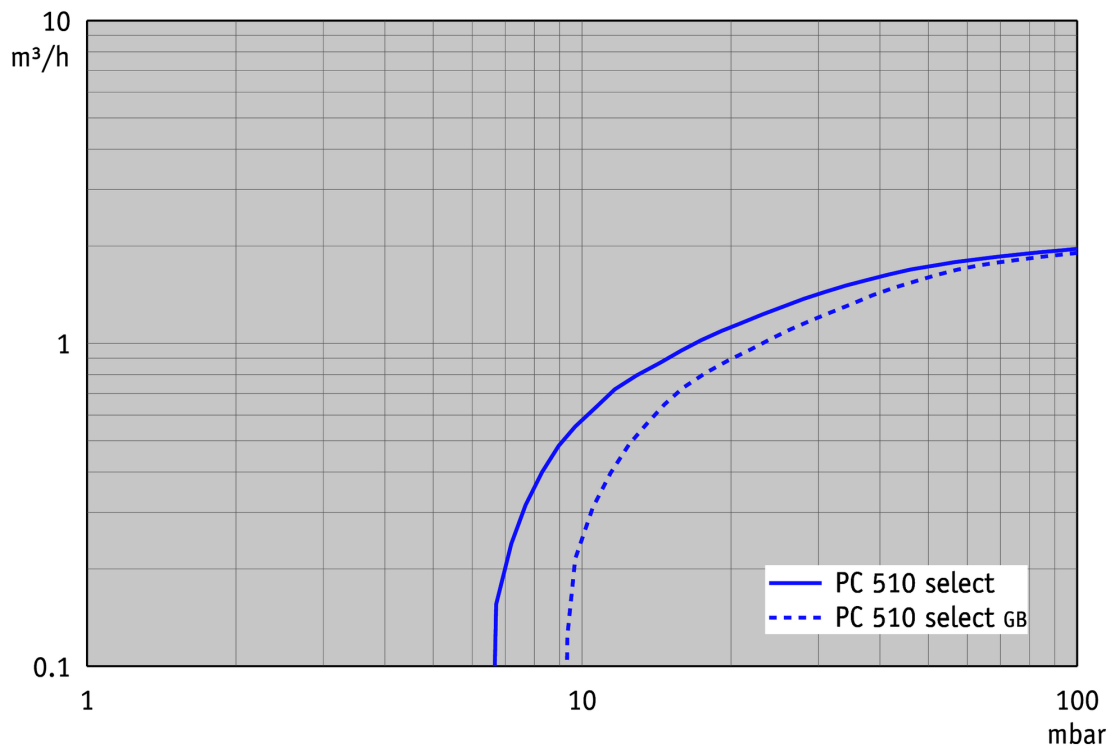

## Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

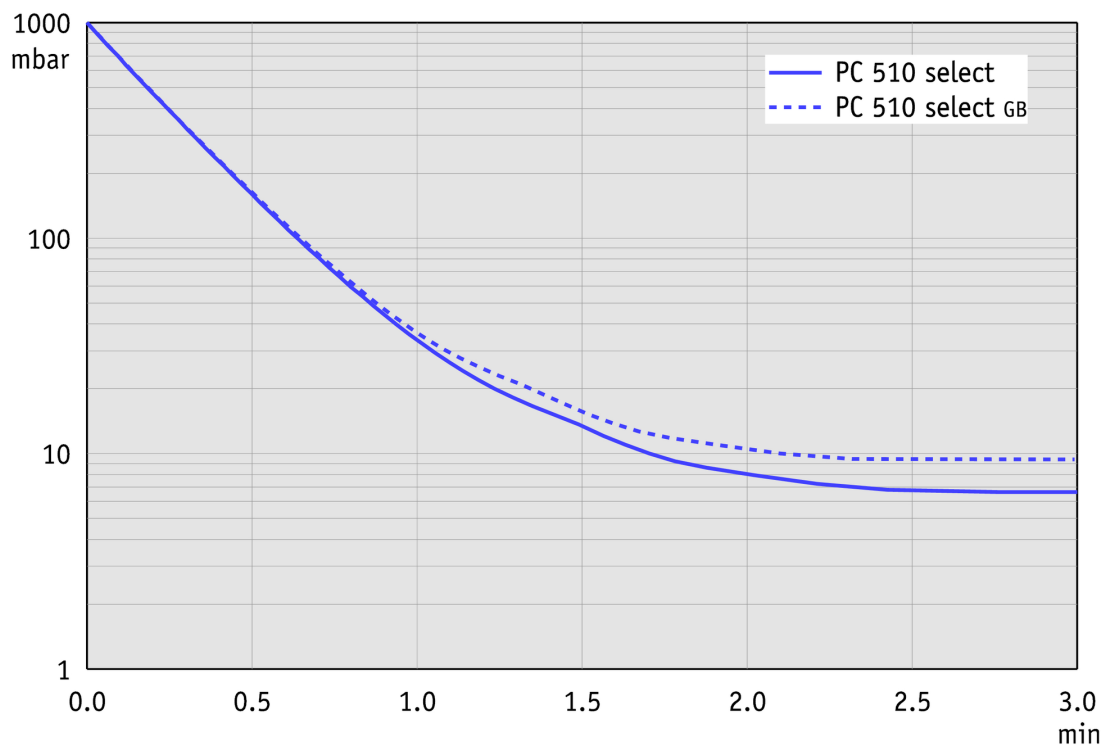

Plan de masse

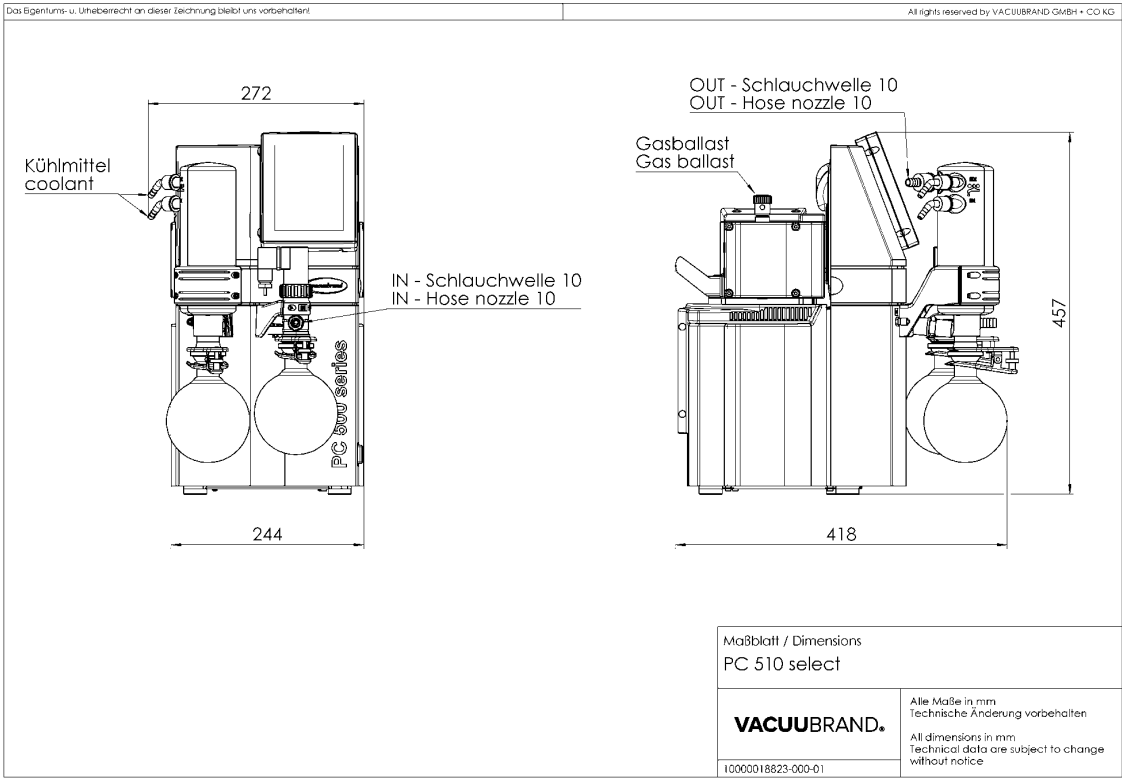

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com