

# Bomba de membrana MV 10 NT VARIO select

[Enlace al sitio web](#)



## Descripción del producto

Las bombas de membrana libres de aceite de cuatro etapas son ideales para el bombeo continuo de gases y logran un vacío final particularmente bueno. Los materiales utilizados, como el aluminio y plásticos seleccionados, abren un amplio campo de aplicación para gases no agresivos. Estas bombas ofrecen la ventajosa combinación de una alta velocidad de bombeo con un vacío final particularmente bueno de hasta 0,5 mbar o 0,3 mbar para la versión VARIO® con control de velocidad de optimización automática. Debido a las membranas dobles FPM altamente flexibles con refuerzo de tela, se logra una larga vida útil de la membrana. El diseño VARIO® regula con precisión el vacío a través de la velocidad y consiste en la bomba y el controlador de vacío VACUU-SELECT® con un transductor de presión externo. Debido al control VARIO®, la bomba no funciona más rápido de lo necesario. Esto amplía los intervalos de mantenimiento.

## Rendimiento

- Controlador de vacío VACUU-SELECT con interfaz de usuario gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo en el laboratorio
- Vida útil de las membranas insuperablemente larga, por lo tanto costos mínimos de operación y mantenimiento
- Bombeo y evacuación sin contaminación.
- alta velocidad de bombeo, particularmente buen vacío final en TURBO-Mode para usar como bomba de respaldo para bombas turbo

Información de pedido

| Descripción del producto | Tensión nominal   frecuencia de red | Tipo de enchufe | Nº de artículo |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| MV 10 NT VARIO select    | 200-230 V   50-60 Hz                | UK              | 25744152       |

Artículos suministrados

Bomba completamente montada, lista para usar, silenciador, con manual.


Accesorios

- Ampliación de funciones del controlador VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Abrazadera para brida KF DN 20/25 (20660001)
- Anillo de centrado externo para bridas KF DN 20/25 (20660196)
- Tubería de vacío en PVC con espiral interno en acero inoxidable con bridas KF DN 25 (20686021)
- Convertidor de brida a oliva (conexión de mangueras) KF DN 25 / DN 10 mm (20662807)
- Manguera de vacío en caucho DN 10 mm (20686002)
- Válvula admisión de aire VB M-B (20674217)
- Juego de juntas MV 10 / MD 12 (20696827)


## Datos técnicos

| Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz (mbar)                                                                         | 12.1 m <sup>3</sup> /h                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz (cfm)                                                                          | 7.1 cfm                                                                                                          |
| Vacío final                                                                                                       | 0.3 mbar / 0.2 torr                                                                                              |
| Número de cilindros                                                                                               | 8                                                                                                                |
| Número de etapas                                                                                                  | 4                                                                                                                |
| Indicador de vacío / tipo de controlador                                                                          | VACUU-SELECT                                                                                                     |
| Temperatura ambiente admisible durante (operación)                                                                | 10 - 40 °C                                                                                                       |
| Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)                                                               | -10 - 60 °C                                                                                                      |
| Max. Presión de salida (abs.)                                                                                     | 1.1 bar                                                                                                          |
| Conexión, lado de aspiración                                                                                      | Brida KF DN 25                                                                                                   |
| Conexión, lado de la presión                                                                                      | G1/2"                                                                                                            |
| Capacidad del motor                                                                                               | 0.53 kW                                                                                                          |
| Rango velocidad motor                                                                                             | 30 - 2400 min <sup>-1</sup>                                                                                      |
| Clase de protección según IEC 60529                                                                               | IP 40                                                                                                            |
| Dimensiones (L x Ancho x Alt.)                                                                                    | 552 mm x 260 mm x 450 mm                                                                                         |
| Peso                                                                                                              | 31.6 kg                                                                                                          |
| Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 50 dBA                                                                                                           |
| Conformidad ATEX                                                                                                  | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only                                                                     |
| Certificación NRTL                                                                                                | No                                                                                                               |
| Interface                                                                                                         | Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required) |


Curva de capacidad de aspiración a 50 Hz

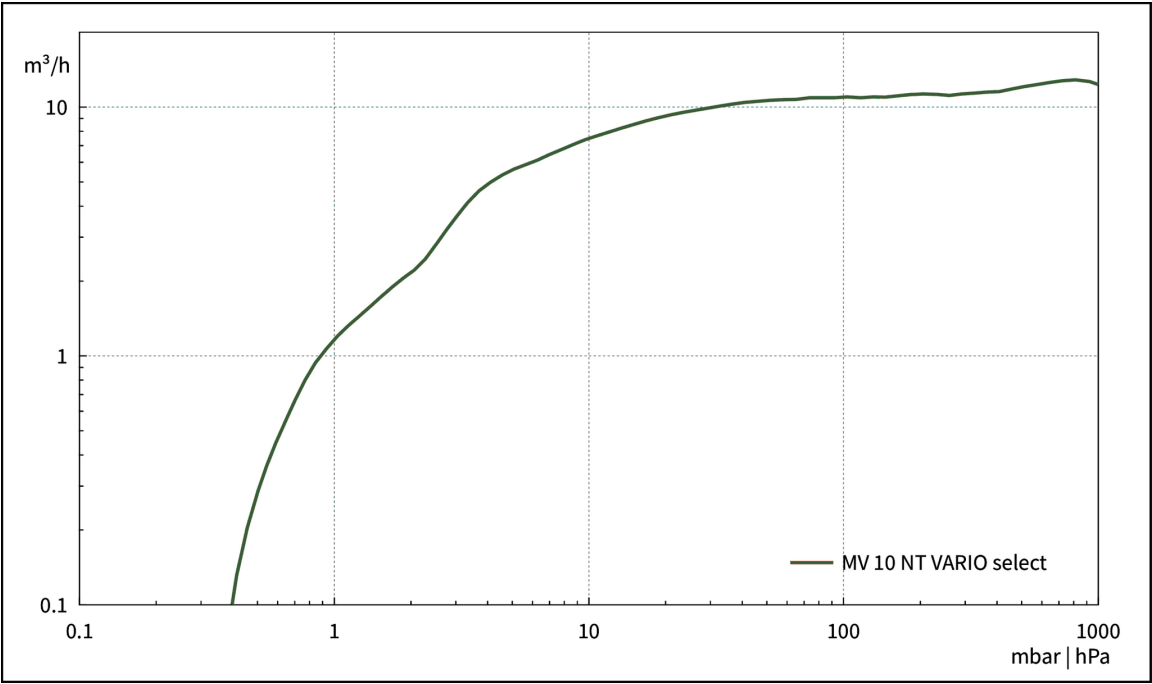

Curva de bombeo en 50 Hz (Volumen 100 l)

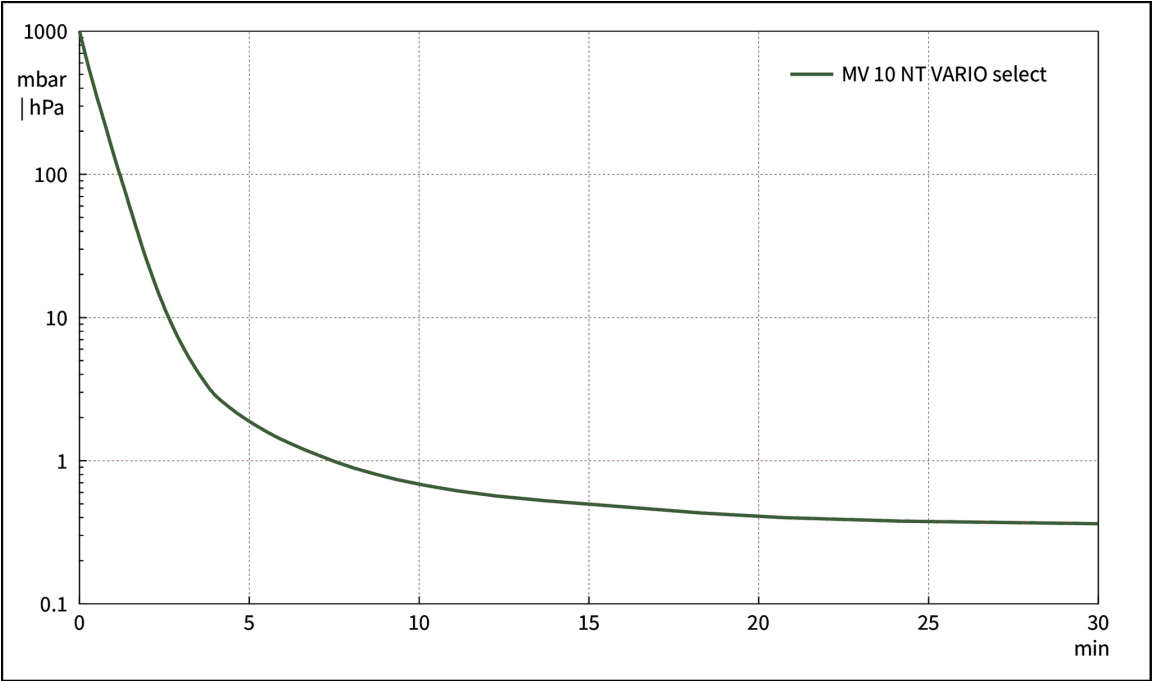

## Hoja de dimensiones

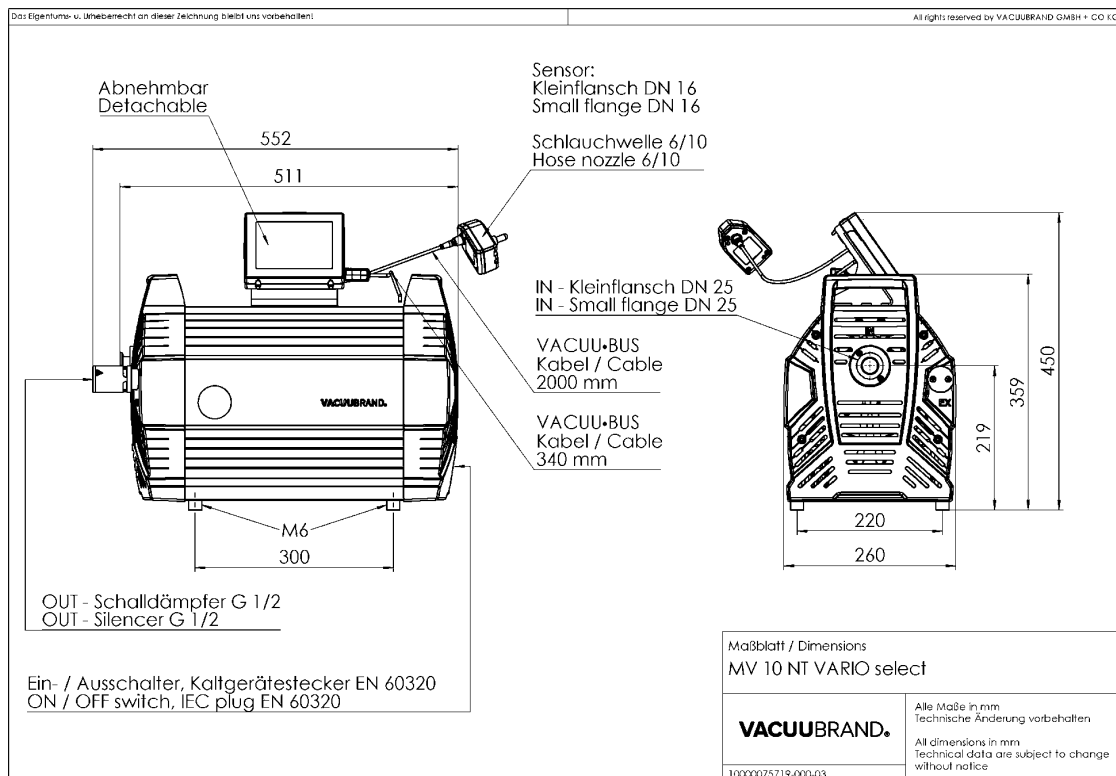

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com