

Paquete bomba rotatoria de paletas RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended

[Enlace al sitio web](#)



Descripción del producto

Estas potentes bombas de vacío rotativas inusualmente compactas y de bajo peso para su capacidad. Son la solución ideal para un amplio rango de procesos y aplicaciones en el laboratorio que requieren un alto vacío o incrementar el caudal a vacío medio. La bomba rotativa de dos etapas RZ6 está disponible también en un paquete incluyendo bomba, filtro de niebla de aceite, válvula de aislamiento y medidor VACUU·VIEW extended.

Rendimiento

- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- alta tolerancia al vapor de agua debido al gas ballast; muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico

Información de pedido

Descripción del producto	Tensión nominal frecuencia de red	Tipo de enchufe	N° de artículo
RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU-VIEW extended	230 V 50-60 Hz	CH	20798161

Artículos suministrados

Bomba rellena de aceite y completamente montada, lista para usarse, con manual, con filtro de aceite FO, válvula VS 16 y medidor VACUU-VIEW extended.


Accesorios

- Manguera de vacío en caucho DN 10 mm (20686002)
- Tubería metálica con bridas KF DN 16 (20673336)
- Separador en el lado entrada AK for RE/RZ 5/6/2.5 (20698006)
- Kit de mantenimiento RE 2.5 - RZ 6 (20648977)

Datos técnicos

Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz (mbar)	5.7 m ³ /h
Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz (cfm)	4.0 cfm
Vacío final	2 x 10 ⁻³ mbar / 1.5 x 10 ⁻³ torr
Vacío final con gas ballast	1 x 10 ⁻² mbar / 0.75 x 10 ⁻² torr
Presión parcial máxima sin gas lastre	4 x 10 ⁻⁴ mbar / 3 x 10 ⁻⁴ torr
Tolerancia al vapor de agua	40 mbar / 30 torr
Número de etapas	2
Indicador de vacío / tipo de controlador	VACUU·VIEW extended
Temperatura ambiente admisible durante (operación)	12 - 40 °C
Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)	-10 - 60 °C
Max. Presión de salida (abs.)	1.1 bar
Capacidad de aceite min / máx	0.34 / 0.73 l
Conexión, lado de aspiración	Brida KF DN 16 / oliva DN 10 mm
Conexión, lado de la presión	Oliva DN 8-10 mm
Capacidad del motor	0.18 kW
La velocidad nominal 50/60 Hz	1500/1800 min ⁻¹
Clase de protección según IEC 60529	IP 40
Dimensiones (L x Ancho x Alt.)	420 mm x 230 mm x 240 mm
Peso	17.8 kg
Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®)	50 dBA
Certificación NRTL	No

Curva de capacidad de aspiración a 50 Hz

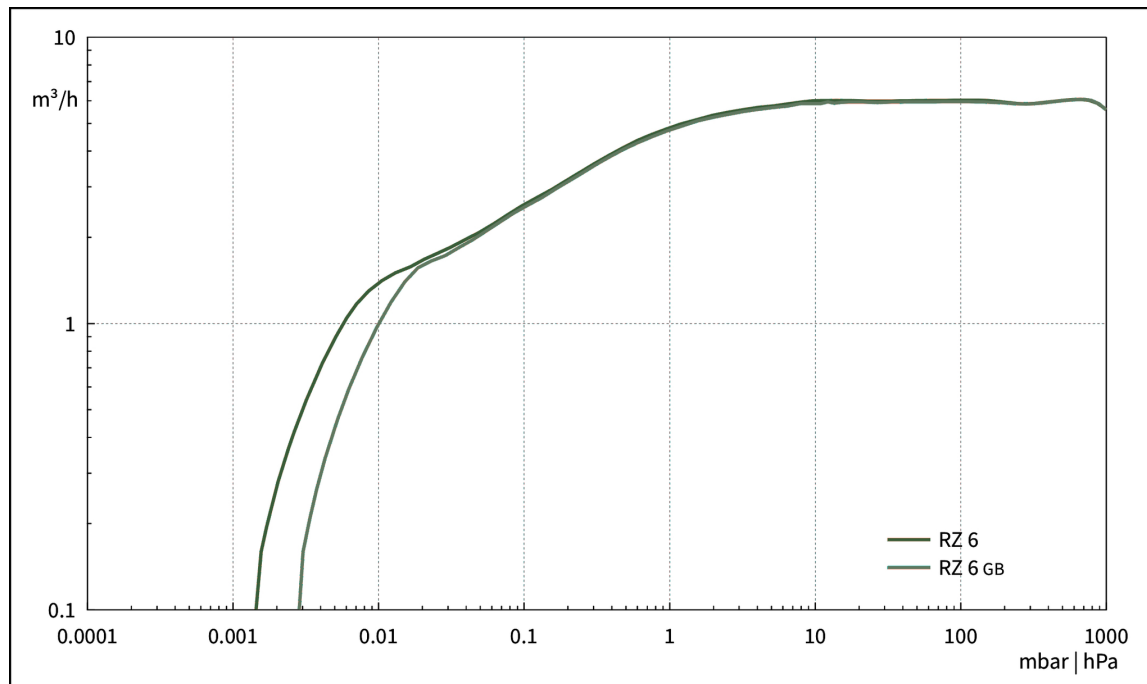

Curva de bombeo en 50 Hz (Volumen 10 l)

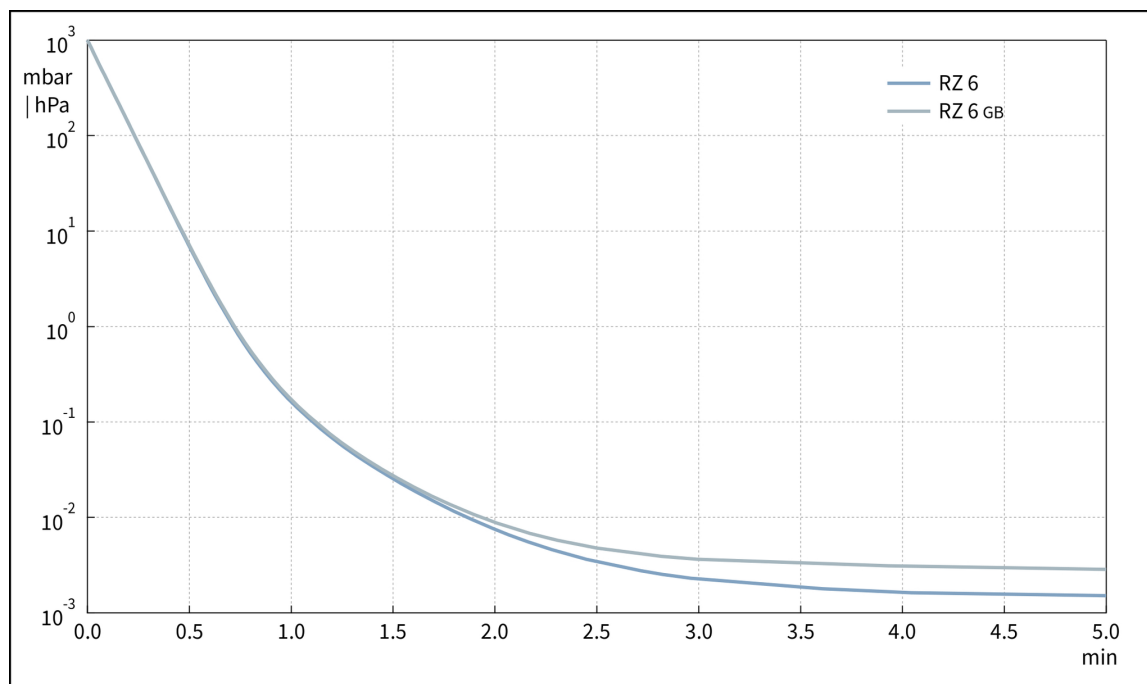


Gráfico de caudal de aspiración a 60 Hz



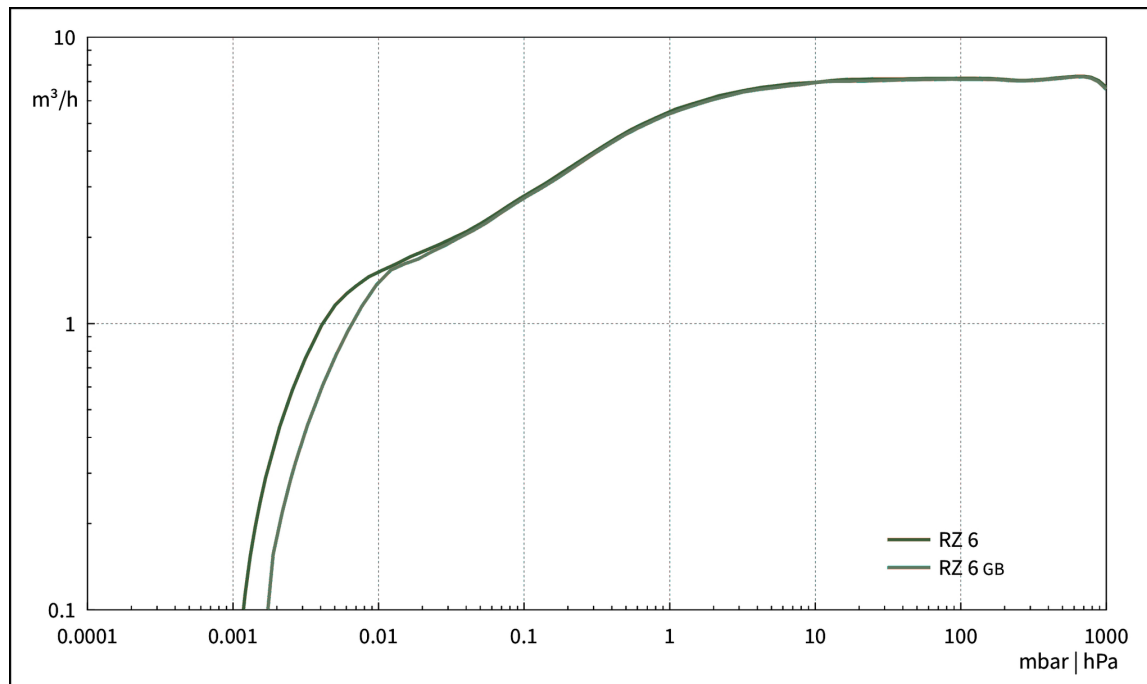


Gráfico de curva de bombeo a 60 Hz (Volumen 10 l)

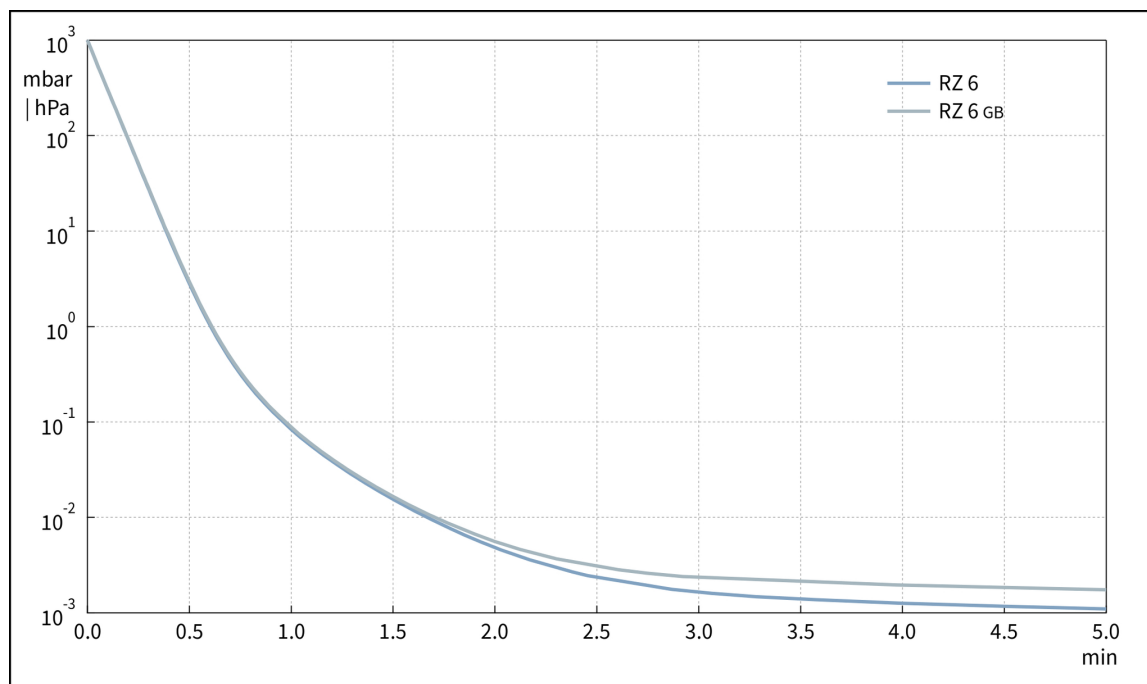

Hoja de dimensiones

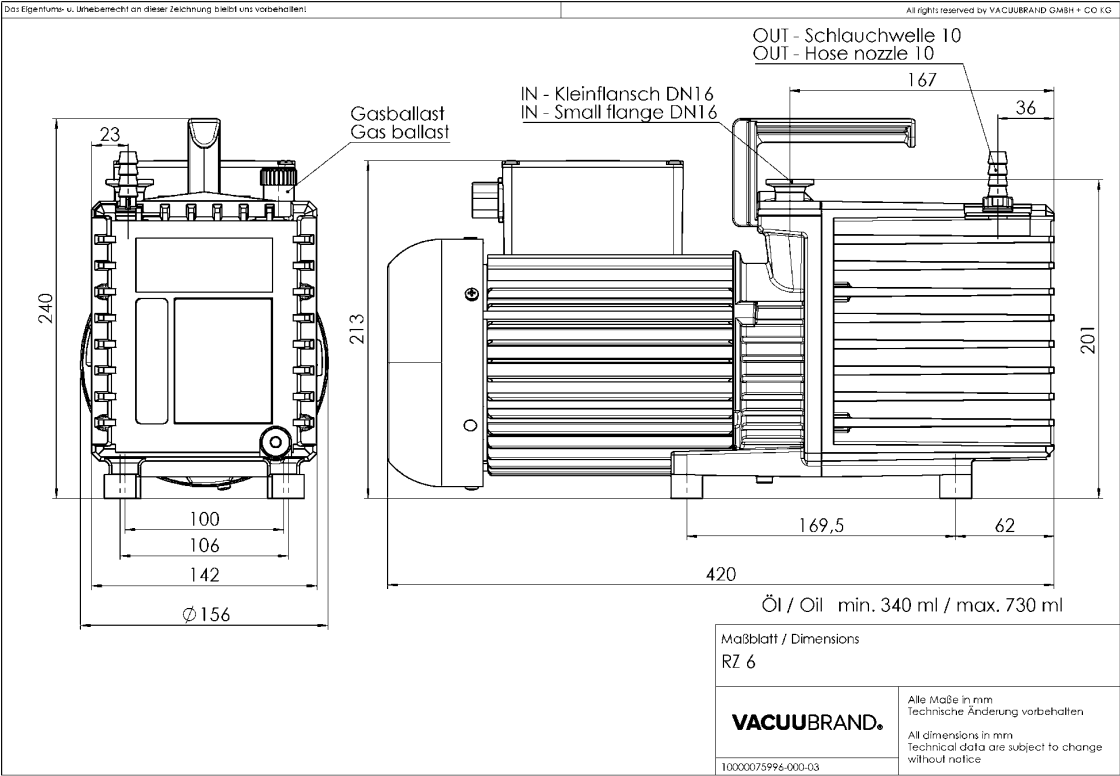

VACUUBRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

All with one goal:

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com