

# Bomba de membrana ME 1

[Enlace al sitio web](#)



## Descripción del producto

La filtración a vacío es una aplicación muy usual para la preparación de muestras en química, microbiología, control de aguas residuales y otros procesos analíticos. En base a su fácil manejo, compacidad y buen rendimiento estas nuevas bombas ME 1 y ME 1C son el aliado perfecto para filtraciones de dispositivos individuales. Estas bombas libres de aceite, un nuevo desarrollo basado en las ya muy eficientes bombas de membrana de tres fases MD 1, se caracterizan por una ya muy probada larga vida útil de sus membranas. El diseño ergonómico con interruptor de encendido-apagado sobre la carcasa de la bomba permite una fácil operación. Su diseño compacto hace que ocupe poco espacio sobre la mesa del laboratorio. La membrana y válvulas de PTFE poseen excelente resistencia a químicos y robustez mecánica. De forma opcional una válvula de control manual con manómetro de presión permite un ajuste gradual de la capacidad de aspiración efectiva.

## Rendimiento

- sencilla de operar, con un interruptor central sobre la carcasa de la bomba
- de marcha muy silenciosa
- necesita de mínimo espacio sobre la mesa del laboratorio
- extremadamente larga vida de la membrana, accionamiento libre de mantenimiento
- materiales en contacto con el medio: PTFE, aluminio

Información de pedido

| Descripción del producto | Tensión nominal   frecuencia de red | Tipo de enchufe | Nº de artículo |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| ME 1                     | 220-230 V   50-60 Hz                | CH, CN          | 20721001       |

Artículos suministrados

Bomba completamente montada, lista para usar, con manual.


Accesorios

- Tubo de vacío transparente DN 8 mm (20686061)
- Válvula para regular y manómetro ME 1 (20696842)
- Juego de juntas ME 1, ME 1C, VP 100, VP 100C (20696874)

## Datos técnicos

| Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz (mbar)                                                                         | 0.7 m³/h                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz (cfm)                                                                          | 0.5 cfm                                      |
| Vacío final                                                                                                       | 100 mbar / 75 torr                           |
| Número de cilindros                                                                                               | 1                                            |
| Número de etapas                                                                                                  | 1                                            |
| Temperatura ambiente admisible durante (operación)                                                                | 10 - 40 °C                                   |
| Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)                                                               | -10 - 60 °C                                  |
| Max. Presión de salida (abs.)                                                                                     | 1.1 bar                                      |
| Conexión, lado de aspiración                                                                                      | Oliva DN 6-10 mm                             |
| Conexión, lado de la presión                                                                                      | Silenciador / G1/8"                          |
| Capacidad del motor                                                                                               | 0.04 kW                                      |
| La velocidad nominal 50/60 Hz                                                                                     | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                  |
| Clase de protección según IEC 60529                                                                               | IP 40                                        |
| Dimensiones (L x Ancho x Alt.)                                                                                    | 270 mm x 121 mm x 155 mm                     |
| Peso                                                                                                              | 5.4 kg                                       |
| Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 49 dBA                                       |
| Conformidad ATEX                                                                                                  | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only |
| Certificación NRTL                                                                                                | Sí                                           |

### Curva de capacidad de aspiración a 50 Hz

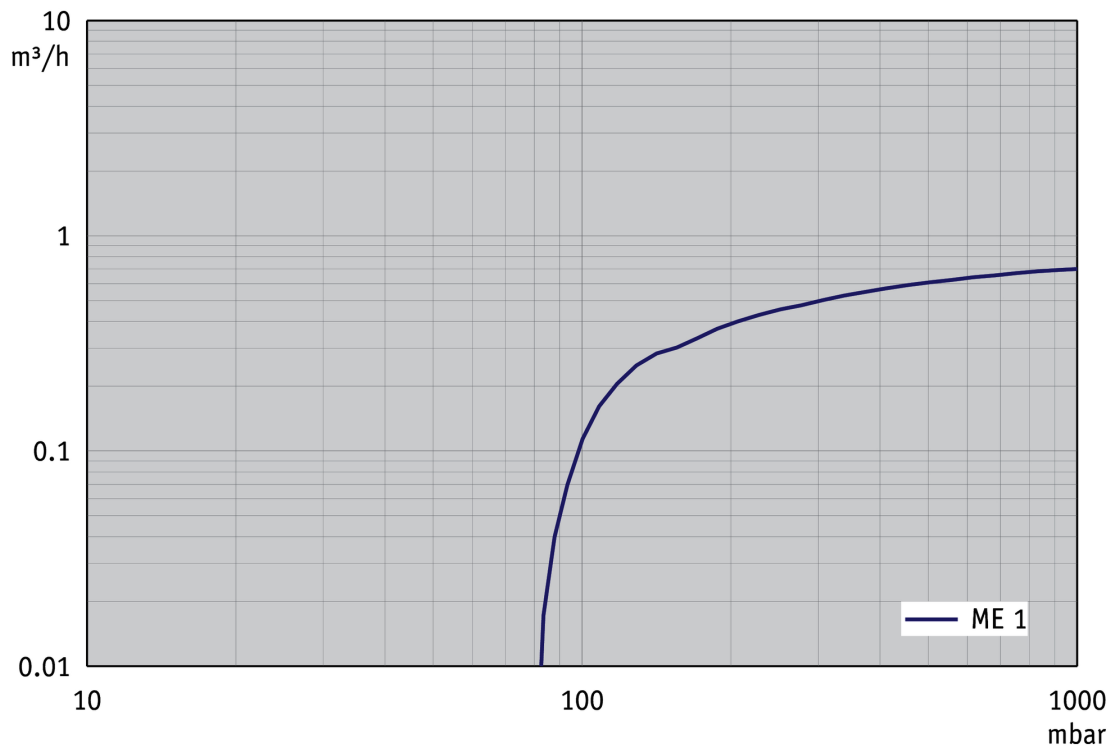

### Curva de bombeo en 50 Hz (Volumen 10 l)

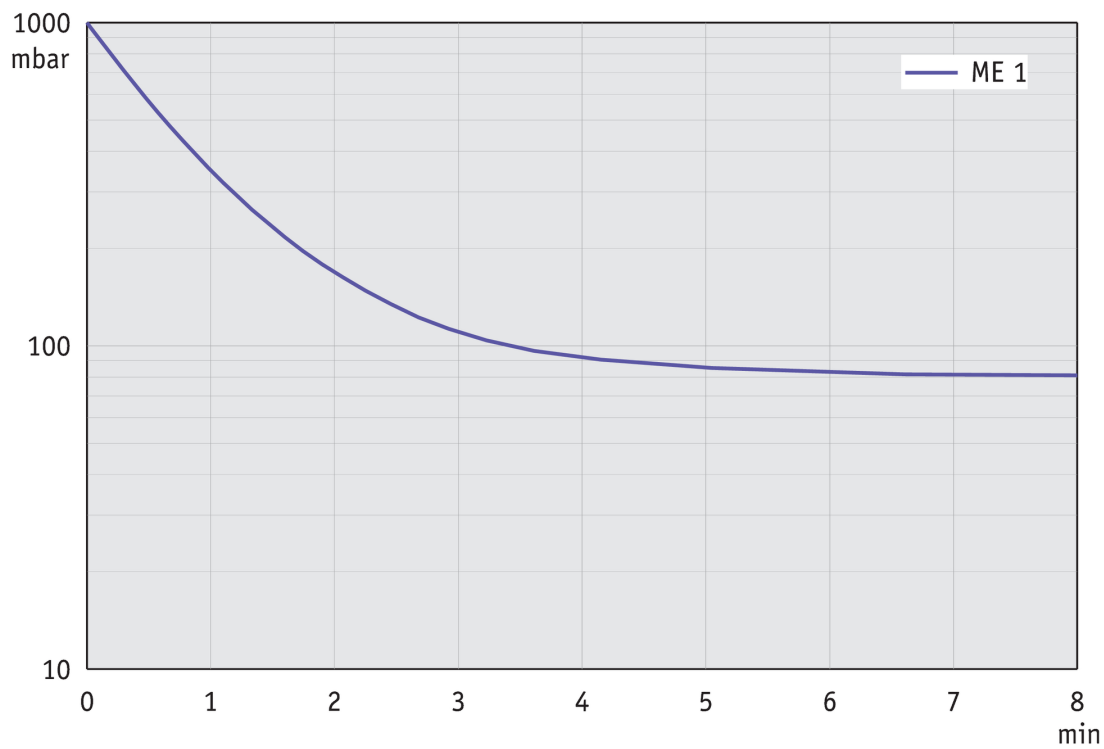


Gráfico de caudal de aspiración a 60 Hz


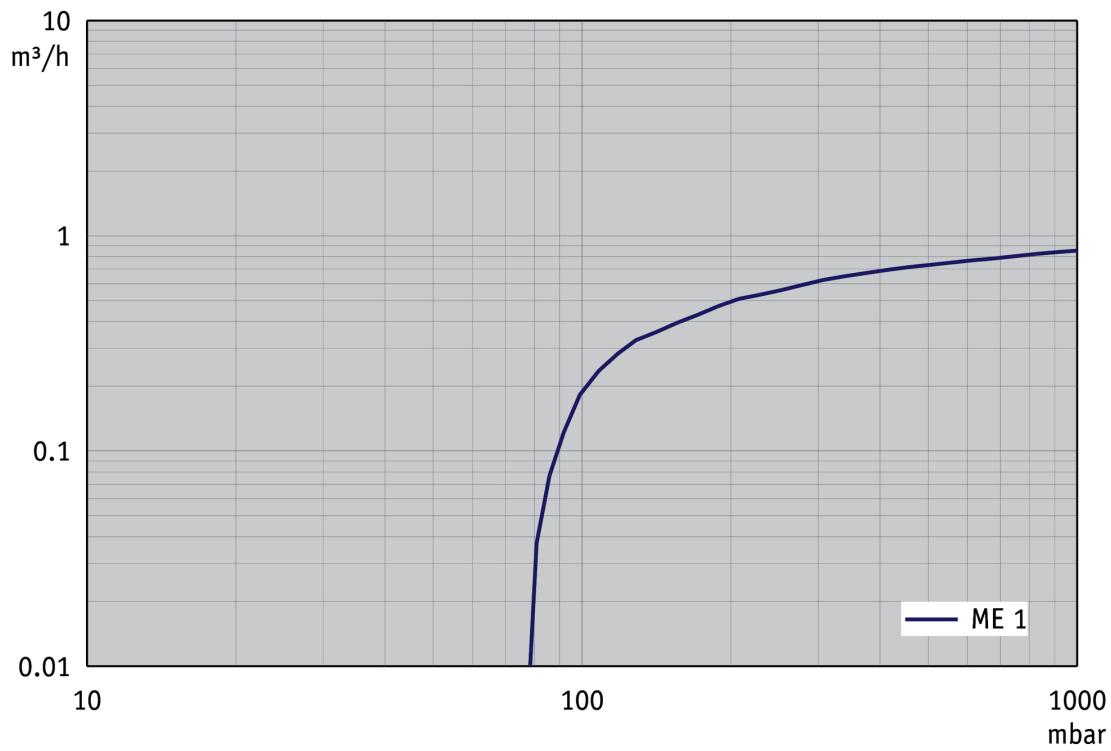


Gráfico de curva de bombeo a 60 Hz (Volumen 10 l)




## Hoja de dimensiones

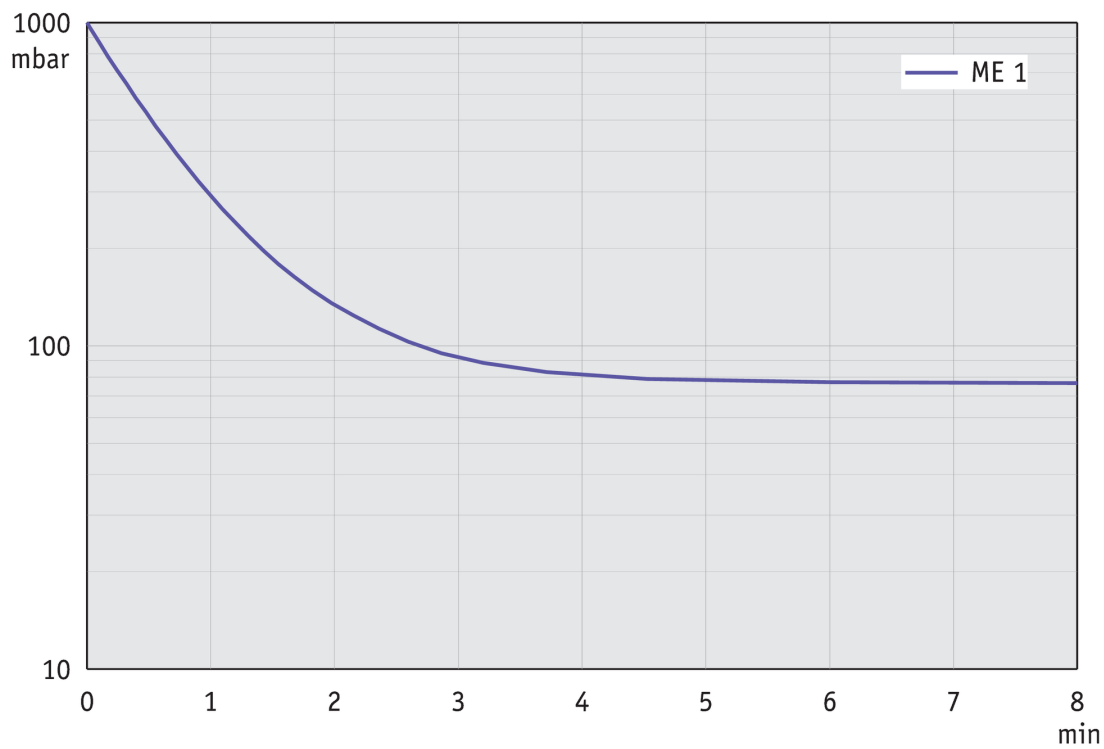



Das Eigentums- u. Urheberrecht an dieser Zeichnung bleibt uns vorbehalten.

All rights reserved by VACUUBRAND GMBH + CO KG.

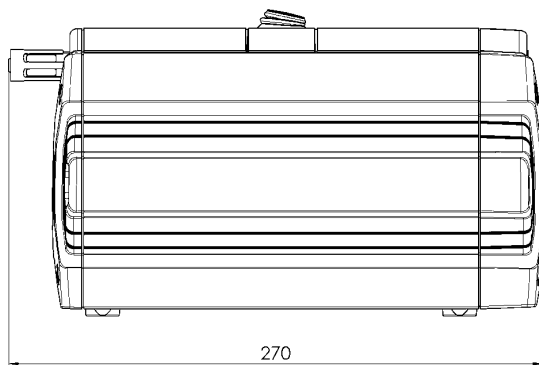

IN - Schlauchwelle 6/10  
IN - Hose nozzle 6/10

OUT - Schalldämpfer  
OUT - Silencer

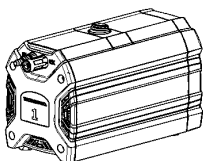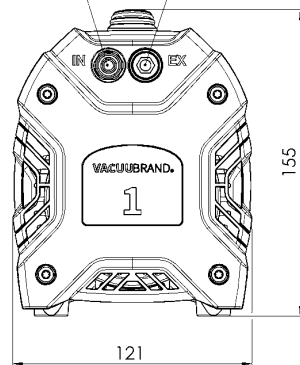

Maßblatt / Dimensions  
ME 1

**VACUUBRAND.**

Alle Maße in mm  
Technische Änderung vorbehalten

All dimensions in mm  
Technical data are subject to change  
without notice

10000018425-000-03

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com