

# Puesto de bomba con resistencia química PC 510 select

[Enlace al sitio web](#)



## Descripción del producto

Este puesto de bomba ofrece un comprobado concepto de generación y control de vacío para muchos procesos de evaporación. La bomba de base es la MZ 2C NT, que cumple con los requisitos de vacío de laboratorio promedio para la mayoría de los solventes. El controlador de vacío integrado VACUU-SELECT con interfaz gráfica de usuario ofrece procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones comunes de laboratorio. En la evaporación del solvente, el VACUU-SELECT detecta automáticamente la presión de ebullición y cambia al modo de control de dos puntos. Por supuesto, en la aplicación, el vacío deseado y otros parámetros también pueden combinarse y controlarse individualmente sin inconvenientes. El separador de vidrio del lado de succión con recubrimiento protector retiene partículas y gotas. El condensador de emisiones a la salida de la bomba permite la recuperación de solventes de casi el 100% para la protección ambiental activa.

## Rendimiento

- Controlador de vacío VACUU-SELECT con interfaz de usuario gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo en el laboratorio
- Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y ofrecen resultados reproducibles
- El editor de aplicaciones fácil de usar y permite desarrollos de procesos personalizados
- Bomba de vacío eficiente con excelente compatibilidad química y de condensados.
- Excelente compatibilidad ambiental a través de una eficiente recuperación de solventes.

Información de pedido

Descripción del producto	Tensión nominal   frecuencia de red	Tipo de enchufe	Nº de artículo
PC 510 select	230 V   50-60 Hz	CEE	20733150
PC 510 select	230 V   50-60 Hz	CH	20733151
PC 510 select	230 V   50-60 Hz	UK	20733152
PC 510 select	100-115 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz	US	20733153
PC 510 select	230 V   50-60 Hz	CN	20733156
PC 510 select	230 V   50-60 Hz	IN	20733157

Artículos suministrados

Puesto de vacío completamente montado, listo para su uso, con manual.


Accesorios

- Ampliación de funciones del controlador VACUU·SELECT VACUU·SELECT User Management (20700900)
- Silenciador con manguera 5cm DN 8-10mm (20636588)
- VACUU·LAN® modulo DN 10/8 mm (20637873)
- Tubo de vacío transparente DN 8 mm (20686061)
- Sensor de nivel de líquidos para matraz redondo 500 ml (20699908)
- Válvula de agua refrigerada VKW-B (20674220)
- Juego de juntas MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Juego de juntas MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)

## Datos técnicos

Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz (mbar)	2 m³/h
Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz (cfm)	1.4 cfm
Vacío final	7 mbar / 5 torr
Vacío final con gas ballast	12 mbar / 9 torr
Número de cilindros	2
Número de etapas	2
Indicador de vacío / tipo de controlador	VACUU·SELECT
Temperatura ambiente admisible durante (operación)	10 - 40 °C
Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)	-10 - 60 °C
Max. Presión de salida (abs.)	1.1 bar
Conexión, lado de aspiración	Oliva DN 8-10 mm
Conexión, lado de la presión	Oliva DN 8-10 mm
Conexión agua de refrigeración	2 x oliva DN 6-8 mm
Capacidad del motor	0.18 kW
La velocidad nominal 50/60 Hz	1500/1800 min <sup>-1</sup>
Clase de protección según IEC 60529	IP 20
Dimensiones (L x Ancho x Alt.)	418 mm x 272 mm x 457 mm
Peso	17.6 kg
Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®)	45 dBA
Certificación NRTL	No
Interface	Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required)

## Curva de capacidad de aspiración a 50 Hz

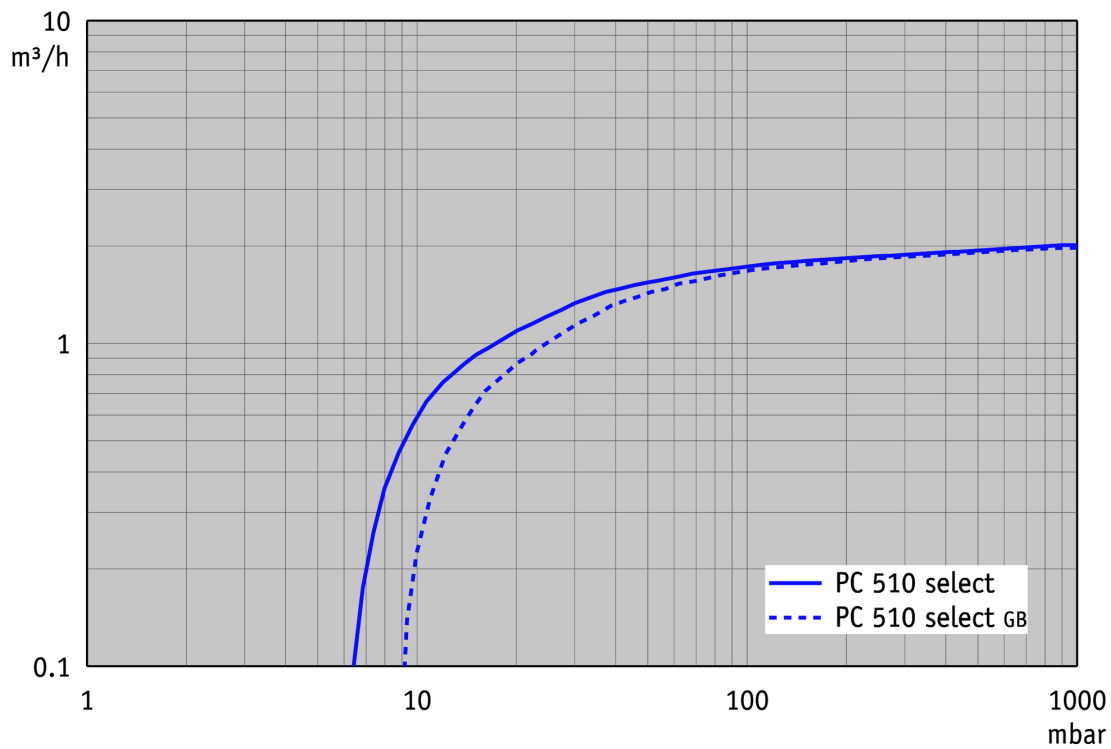

## Curva de bombeo en 50 Hz (Volumen 10 l)

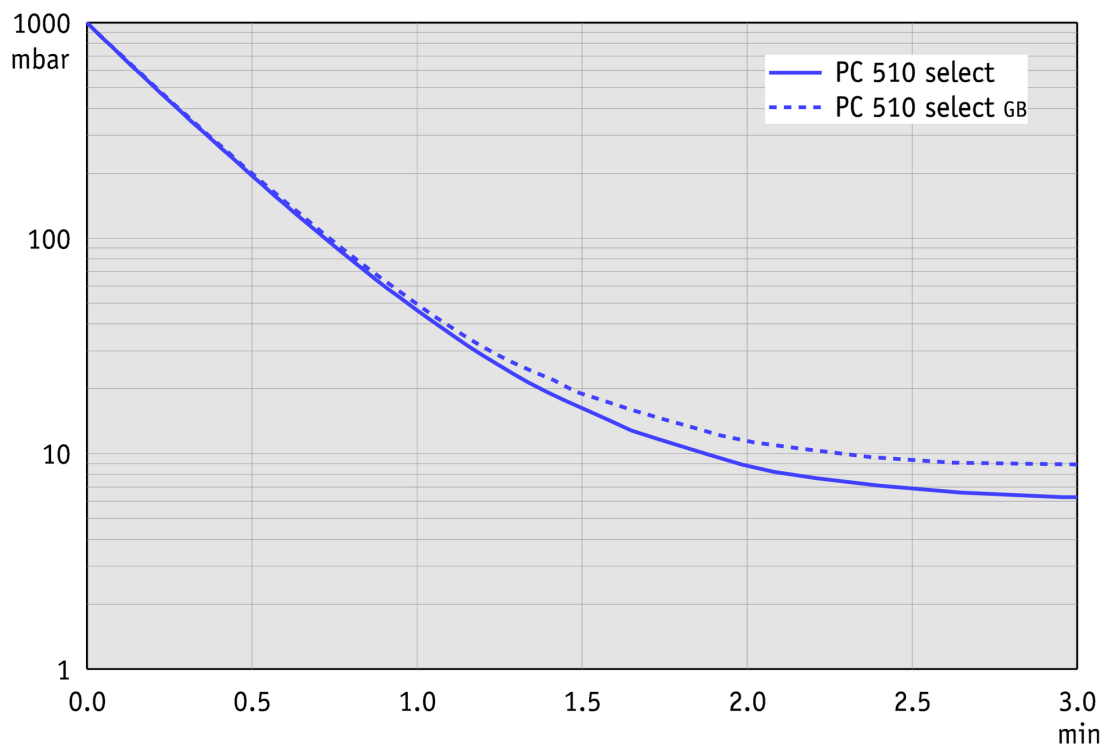


Gráfico de caudal de aspiración a 60 Hz



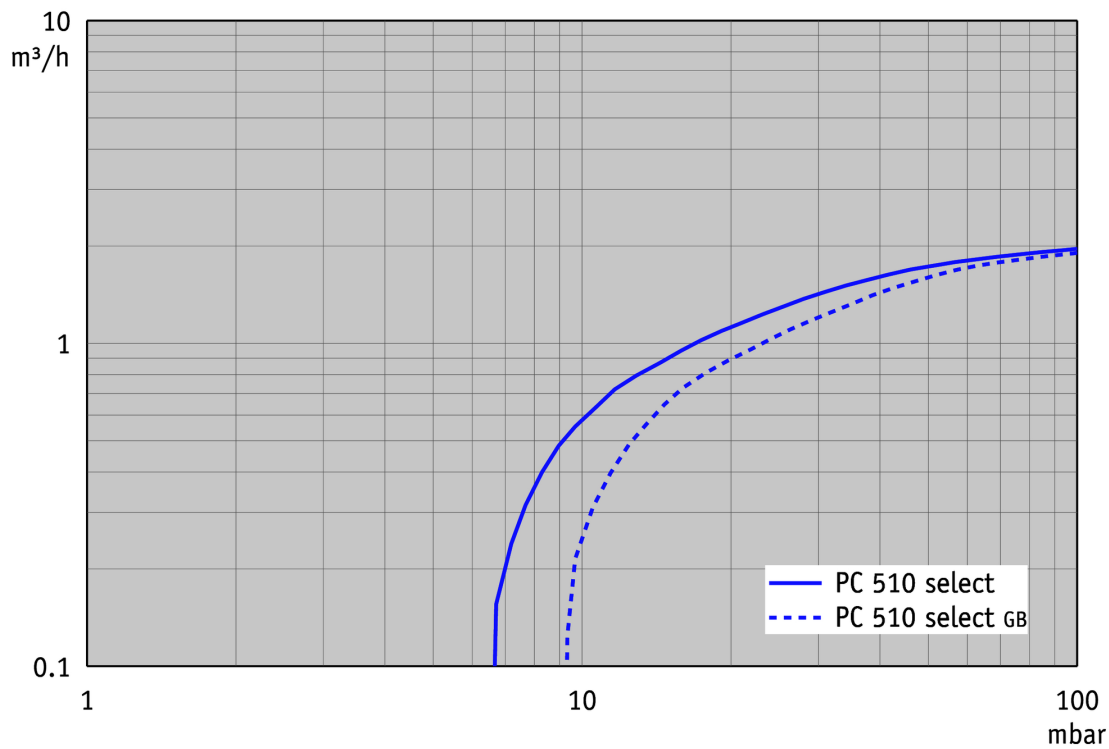


Gráfico de curva de bombeo a 60 Hz (Volumen 10 l)

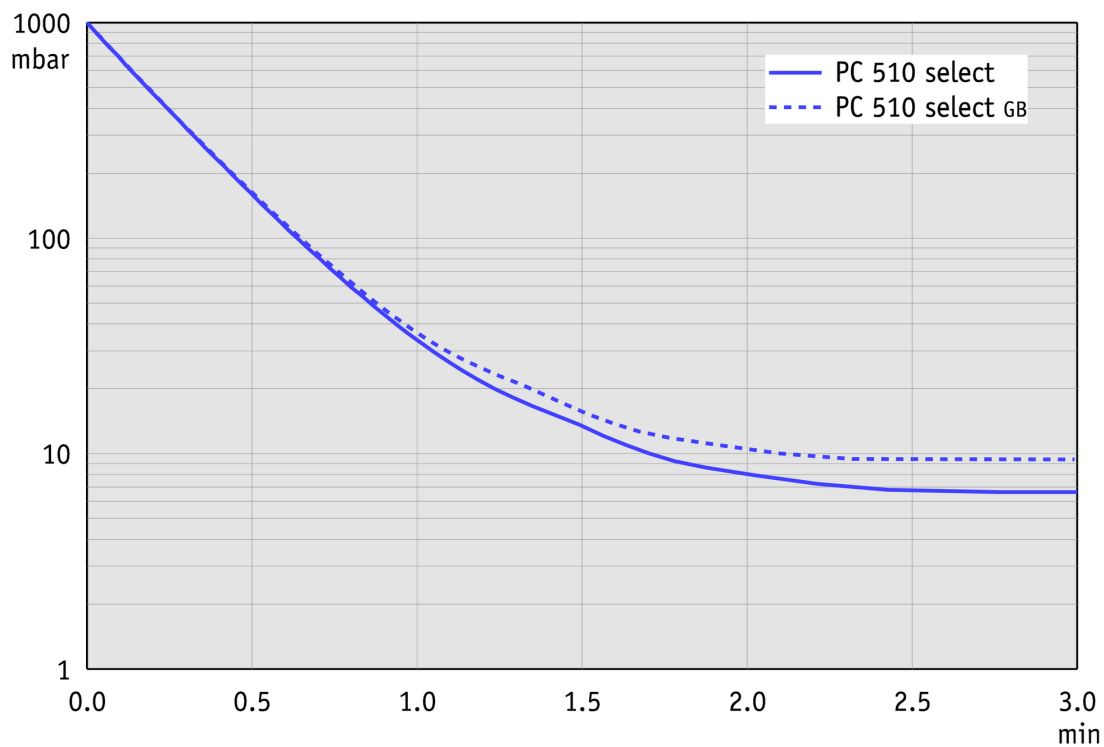

Hoja de dimensiones

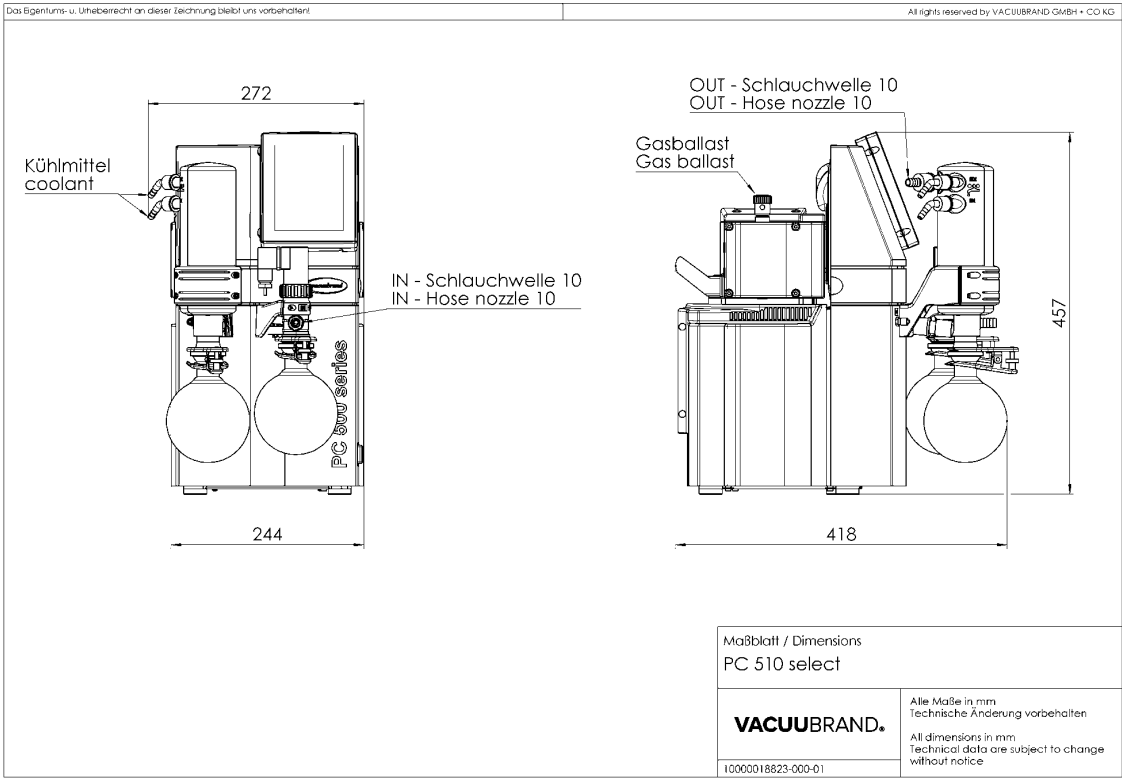

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com